

連合印象/ポスト印象用補強ピン



NARCOHM

AXE PIN

アックスピン シリーズ
SERIES

ポスト印象を精密に

使いやすさにこだわったポスト印象用補強ピン

新しい素材の採用で、
カットしやすく曲げやすい

寒天のちぎれを防止

石膏注入時のポストの
歪みを防止




カットしやすく、曲げやすい
経済性に優れた
ストレートタイプ
120mm

アックスピン ストレート

AXE PIN ST

● ワイヤ径 0.2mm ● ワイヤ径 0.25mm ● ワイヤ径 0.3mm (長さ 120mm)

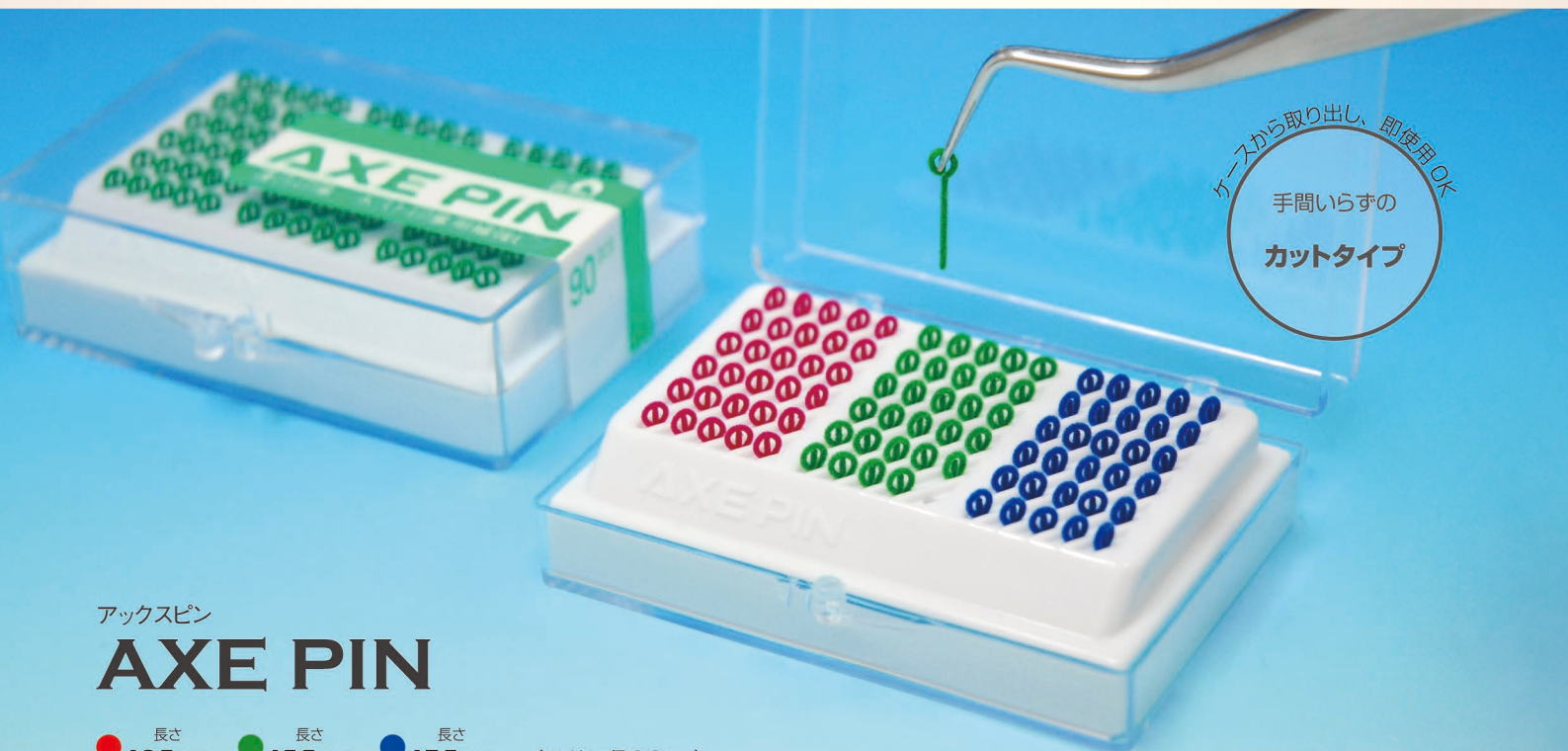

ケースから取り出し、即使用OK
手間いらずの
カットタイプ

アックスピン

AXE PIN

● 長さ 12.5mm ● 長さ 15.5mm ● 長さ 17.5mm (ワイヤ径 0.3mm)

アックスピン シリーズ


ポスト印象をしっかりサポート。

印象材を補強し、精確な印象採得が可能です。


●維持力アップ ●ニッケル合金にナイロン繊維電気植毛 ●寒天・シリコーン印象材対応

AXE PIN ST アックスピン ストレート ストレートタイプ


■使用方法

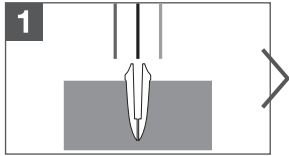


1 ポスト孔の径に適したアックスピン ストレートを選択します。

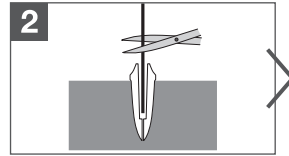


2 ポスト孔の深さより少し長めにアックスピン ストレートをカットします。

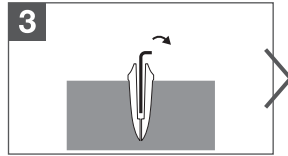


3 維持力を増すため先端を直角に曲げます。

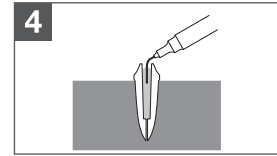


4 ポスト孔にシリンジの針を奥まで挿入し、寒天を静かに注入しながら、気泡を残さないように針を抜き取ります。

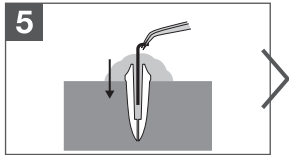

5 準備したアックスピン ストレートをポスト孔に静かに挿入します。

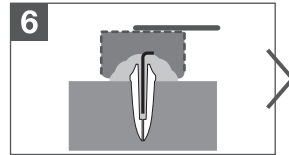

6 アルジネートを盛ったトレーを静かに圧接して、印象材の硬化を待ちます。

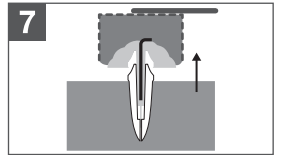

7 アルジネートの硬化を確認してから、ポスト孔口部方向に静かにトレーを取り出してください。(印象材の端からエアーを吹き込むと簡単に外れます。)

【仕様】

色	ワイヤー径	ワイヤー長さ
赤	φ0.2mm	120mm
緑	φ0.25mm	120mm
黒	φ0.3mm	120mm

【素材】

ワイヤー：ニッケル合金線
植毛：ナイロン繊維電気植毛

【包装】


各単色：20本入
アソート：赤7本入
緑7本入
黒6本入

●届出番号 20B2X00017000003


一般的名称：JMDN 70887000 歯科印象採得用器材
機器の分類：一般医療機器

AXE PIN アックスピン カットタイプ


■使用方法

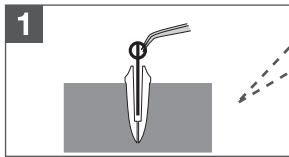


1 ポスト孔の長さに合わせて、アックスピンを選択します。長さが適当でない場合は、ハサミでカットして調整してください。

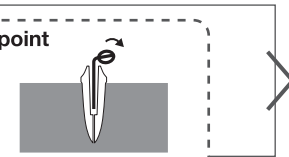


2 ピンの長さに余裕がある時は、ヘッド部を舌側方向に曲げてご使用ください。維持力が増します。

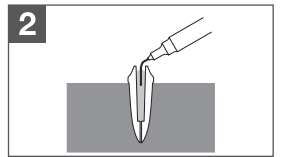


3 ポスト孔にシリンジの針を奥まで挿入し、寒天を静かに注入しながら、気泡を残さないように針を抜き取ります。

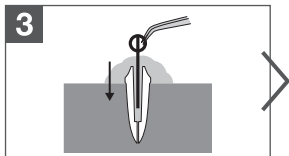

4 準備したアックスピンをポスト孔に静かに挿入します。

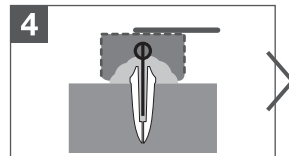


5 アルジネートを盛ったトレーを静かに圧接して、印象材の硬化を待ちます。

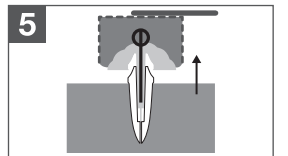

6 アルジネートの硬化を確認してから、ポスト孔口部方向に静かにトレーを取り出してください。(印象材の端からエアーを吹き込むと簡単に外れます。)

【形状】

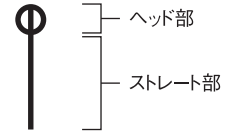

【仕様】

色	ワイヤー径	ヘッド部径	ストレート部長さ	全長
赤	φ0.3mm	φ3.5mm	9mm	約12.5mm
緑	φ0.3mm	φ3.5mm	12mm	約15.5mm
青	φ0.3mm	φ3.5mm	14mm	約17.5mm

【素材】

ワイヤー：ニッケル合金線
植毛：ナイロン繊維電気植毛

【包装】

各単色：90本入
アソート：各色30本入

●届出番号 20B2X00017000001

一般的名称：JMDN 70887000 歯科印象採得用器材
機器の分類：一般医療機器

サンプルをご希望の方は、下記の内容に記載をし、弊社まで FAX いただきますようお願い申し上げます。

お申し込みFAX番号

047-311-3133

株式会社ナルコム製作所 宛

臨床試用医療機器試用書

平成 年 月 日

医院様名
(医療機関名)

〒
ご住所

TEL

-

-

お取引先
材料店様名

ご支店

ご担当者

チェック	品名・規格	試用量
✓	アックスピン ストレート	赤・緑・黒各1本(長さ40mm)
✓	アックスピン	赤2本・緑2本・青1本

※公正競争規約施行規則及び運用基準

●臨床試用医療機器の定義：医療担当者が当該医療機器の使用に先立って、有効性、安全性について評価するために臨床試用することを目的とするもの。

医療機器業公正取引協議会

・仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

本製品に関するお問い合わせ先

製造販売元

◎株式会社 ナルコム製作所

本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田 1251-239

営業所 〒270-2253 千葉県松戸市日暮 2-3-15 7F

TEL 047-311-3600 FAX 047-311-3133

E-mail info@narcohm.co.jp URL http://www.narcohm.co.jp



MD 518564 / ISO 13485: 2003