

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

3DentMOVIE は、従来の写真や模型等では説明することが難しかった口腔内の状況を、わかりやすく、また円滑に患者さんに説明するための 3D アニメーションを利用したコミュニケーション支援ツールです。

治療内容の説明、治療内容の選択を 3D アニメーションで行うことにより、患者さんとのコミュニケーションが容易になり、またコンサルテーションの時間短縮にもつながります。

患者さんにより良い治療を受けていただくために皆様の臨床現場では非 3DentMOVIE をご活用ください。

今後とも製品の技術・サービスの向上に努めてまいりますので、末永く 3DentMOVIE をご愛用下さいますよう、お願い申し上げます。

株式会社ナルコム

製品の特長

プリント機能

好きなシーンを印刷することが出来ます。

ドローイング機能

ムービーに文字や図形を書き込むことが出来ます。

スライドショー機能

任意の画像をスライドショーにすることが出来ます。

再生速度調節機能

ムービーの速度を 3 段階に調節することが出来ます。

写真取込み

お持ちの写真を 3DentMOVIE に取込むことが出来ます。

カスタマイズ機能

医院様にて、名称や表示するムービーの変更を行うことが出来ます。

目次

目次

● ソフトウェアライセンス契約書	1
● 動作環境	2
● 3DentMOVIE をインストールする前に	3
● インストールを行う	4
・インストール後の初期設定	7
● ユーザー登録について	8
・インターネットで登録する方法	9
・FAXで登録する方法	9
・携帯電話で登録する方法	9
● 操作の流れ	10
● 初期設定について	11
● メイン画面の説明	14
・3DentMOVIE 起動方法	16
・タブの使用方法について	17
・ムービーの再生・一時停止・停止について	18
・テンキー対応について	19
・ムービーの速度調節について	19
・オブジェクトやテキストを書込む	20
・静止画として取込む	22
・スライドショーを見る	23
・静止画として保存する	24
・静止画の印刷を行う	25
・3DentMOVIE の終了方法	26
● カスタマイズ機能	27
・ムービーを削除する	27
・ムービーの順番を変更する	29
・分類を変更する	29
・分類名称を変更する	30
・静止画を登録する	31
・初期化を行う	32
● 登録解除方法について	33
・インターネットでの登録解除	34
・FAXでの登録解除	35
● トラブルシューティング	36
● お問い合わせ先	38

ソフトウェアライセンス契約書

ソフトウェア製品は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、そのほかの無体財産権に関する法律及び条令によって保護されています。ソフトウェア製品は許諾されるもので販売されるものではありませんので予めご了解下さい。

1. ユーザー登録について

下記の使用承諾書をお読みになった上で各事項にご同意、ユーザー登録された方のみ使用権が発生します。

2. 著作権・使用権（ライセンスの許諾）について

- A. 本ソフトウェア製品に収録されている、すべてのデータの使用許諾権、所有権、著作権は、株式会社ナルコム製作所に帰属します。
- B. お客様は、本ソフトウェア製品を1台のコンピュータにのみインストールを行うことが出来ます。複数のコンピュータでご利用になりたい場合は、追加でライセンスをご購入下さい。
- C. 本ソフトウェア製品に収録されているデータは、商品を正規に購入し、ユーザー登録された方に限って個々に使用権が発生するものとします。正規購入ユーザー以外の方、登録をされていない方は使用できません。
- D. 使用権者であっても、賃貸目的に使用することは出来ません。
- E. 使用権者であっても、本ソフトウェア製品に収録されているデータをコピーし第三者に販売や譲渡は出来ません。
- F. 商業利用について

本ソフトウェア製品に収録されているデータをそのまま、もしくは修正、加工して類似の商品を製造・販売することは出来ません。データの販売を目的とした利用については、上記2の許諾範囲を超えるものと解釈されます。したがって、たとえ一部修正、加工してあっても、結果として使用権者が本ソフトウェア製品に収録されているデータを2次利用出来るような形で販売することは禁じます。

本製品から取得した静止画像についても Web での公開及び雑誌等への利用も禁止致します。

3. 保証の限定

- A. 本ソフトウェア製品に収録されているデータは、登録ユーザー本人の責任において使用されるものとします。本製品の内容は十分注意して制作されていますが、個々のユーザーの要求のすべてを満たさないこともあり、また完全に無欠陥の製品で無いかもしれないことを承諾するものとします。製造上の原因による欠陥に関してはディスクの交換またはご購入金額の払い戻しを行います。また、本製品の使用の結果として発生した、あるいはそれらを使用することが出来なかったことから発生した損害や不利益については、一切責任を負いません。
- B. 本ソフトウェア製品に収録されているデータの内容についての責任は、一切負えませんのであらかじめ内容をご確認の上ご利用下さい。
- C. 本製品の内容や記載事項は、将来予告なしに変更される場合があります。

4. その他

- A. お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニア・逆コンパイル・逆アセンブルすることは出来ません。
- B. 本契約に関わる紛争は、松戸地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

動作環境

動作環境

	スペック
OS	Windows XP Service Pack2 以上, Windows Vista
CPU	1GHz 以上
メモリ	512MB 以上
ハードディスク	空き容量 2GB 以上
画面解像度	1024×768 以上 (96dpi 専用)
その他	CD-ROM ドライブまたはその互換ドライブ

- ※1 お使いの画像データが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必要になります。
- ※2 上記スペックを満たしているコンピュータでもスペック、グラフィック性能等によって動きがスムーズではない場合がございます。

※Microsoft Windows は、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国、地域における登録商標です。

3DentMOVIE をインストールする前に

- 3DentMOVIE のインストールを行う前に実行中のすべてのアプリケーションを終了して下さい。
- ウイルスチェックプログラムをご使用の場合は、必ず終了させてからインストールを行って下さい。
- スクリーンセーバーを設定している場合は、インストール中にスクリーンセーバーが起動しないように設定を変更して下さい。
(ディスプレイ及びハードディスクの省電力機能を設定している場合も同様)
- 本製品は1ライセンスにつき1台のコンピュータへインストールすることが可能です。
2台以上のコンピュータへのインストールは行えません。
複数台のコンピュータへのインストールをご希望の際には追加ライセンスをご購入頂く必要がございます。
万が一使用中のコンピュータが破損してしまった場合は同封の登録解除申請書にて弊社までご連絡頂くか、
直接弊社へお電話下さい。

管理者権限が必要な項目


	Windows XP	Windows Vista
インストール	○	○
インストール後の初期設定	—	○
受付番号登録	—	○
初期設定	—	○
3DentMOVIE 起動	—	—
ムービー再生・ドローイング等	—	—
登録解除	—	○

※Windows XP は通常設定のコンピュータに限りインストール時のみ管理者権限が必要です。

インストールを行う

3DentMOVIE をインストールするには、以下の手順で行って下さい。


1. 3DentMOVIE の CD を CD-ROM ドライブにセットすると自動的にインストーラーが立ち上がります。

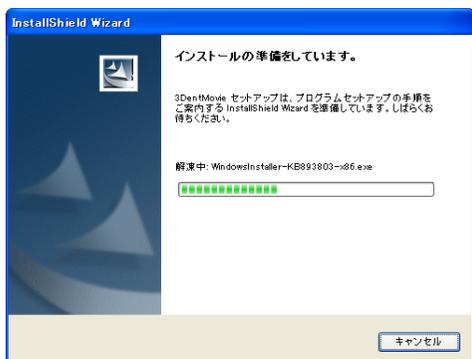

自動的に立ち上がらない場合は、マイコンピュータより CD ドライブを開いて【setup.exe】を W クリックして下さい。


※ 2 の画面に変わるまでお時間がかかる場合がございます。(最大約 15 分程度)

【Windows Vista へのインストールの場合】

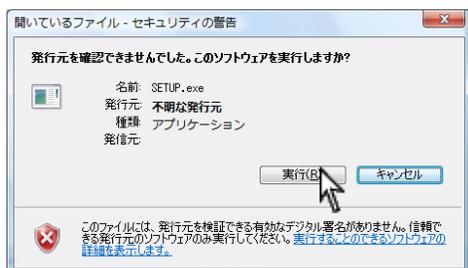

左画面が表示される場合がございます。

実行 (R) をクリックして下さい。

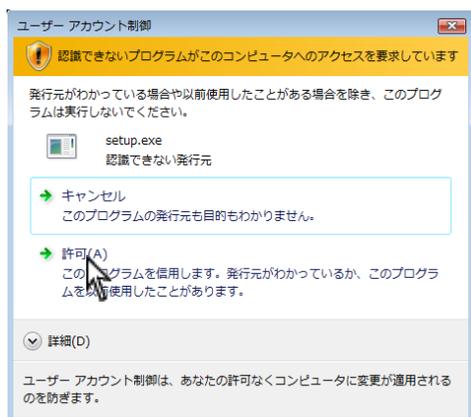


ユーザーアカウント制御画面が表示されます。

許可 (A) をクリックして下さい。

インストールが開始されます。




2. 3DentMOVIE Install Shield ウィザードが表示されたら **次へ** をクリックします。

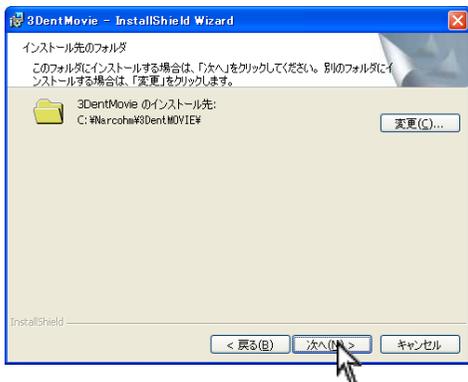


3. **次へ** をクリックします。インストール先を変更する場合は**変更**をクリックします。

※ 基本的にインストール先は変更しないで下さい。
通常インストール先
→ C:\Narcocohm\3DentMOVIE\

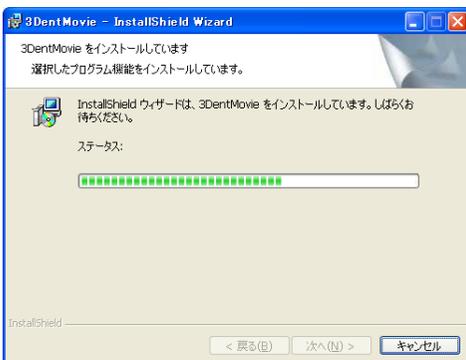

4. インストール中ですのでそのままお待ち下さい。

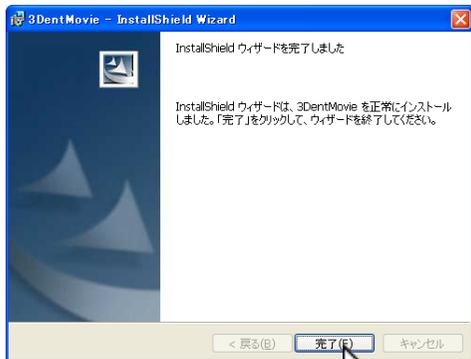

5. セットアップ完了です。**完了**をクリックして下さい。



【注意】

インストール後はコンピュータの再起動を行って下さい。


※ メッセージが表示されない場合も再起動を行って下さい。

インストール後の初期設定



1. デスクトップにある 3DentMOVIE ショートカットアイコンをWクリックして下さい。

【Windows Vista の場合】

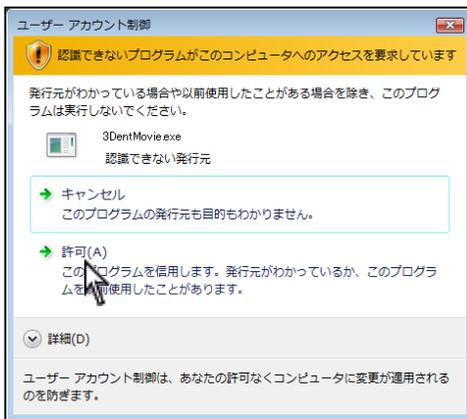

ユーザーアカウント制御画面が表示されます。

許可 (A) をクリックして下さい。

2. 初期設定画面が表示されます。

医院情報をご入力下さい。

弊社のユーザー登録に必要な情報ですので必ず全ての項目をご入力下さい。

プロダクト ID は CD ケースの裏側に記載がございます。

入力後、**登録** をクリックして下さい。



完了メッセージは **OK** をクリックして下さい。

ユーザー登録について

3DentMOVIE を起動したら、必ずユーザー登録をして下さい。ユーザー登録を行わない場合、セットアップから起算して10日後に3DentMOVIE が使用出来なくなります。


【注意】

セットアップから起算して10日を過ぎてても、ユーザー登録は行えます。ユーザー登録後、再び3DentMOVIE を使用できます。

1. 受付番号を申請してユーザー登録します。
インターネット、携帯電話、FAX またはお電話にて登録可能です。



【Windows Vista でご利用のユーザー様へ】

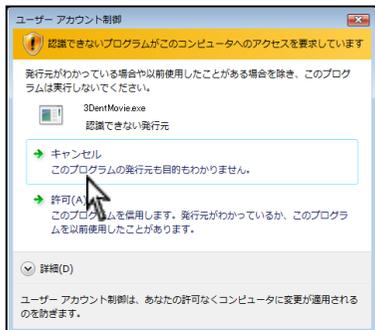

受付番号登録がお済みでない場合には、3DentMOVIE 起動時に【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。
【許可】をクリックして頂ければ起動致しますが、お早めにご登録下さい。

2. 登録方法については次のページをご参照下さい。

【インターネットで登録する方法】

ご使用のコンピュータがインターネットに接続されている環境であることを確認して「インターネットを利用して受付番号を取得する」のボタンをクリックします。自動的に受付番号を取得して登録が完了します。

【注意】

この弊社に送られる情報は、郵便番号・歯科医院名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス・コンピュータ情報・プロダクトID・トライコードのみです。その他の個人情報は、送信されません。
 弊社の個人情報保護宣言につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

【FAXで登録する方法】

FAXで受付番号を取得する場合は、「受付番号申請用紙を印刷する」をクリックして申請用紙を印刷します。申請用紙に書かれているFAX番号に送信して下さい。

弊社にてユーザー登録完了後、受付番号が記載された用紙が返信されますので画面の入力欄に受付番号を入力して「登録」ボタンをクリックして下さい。登録が完了して通常通りご使用いただけます。

《受付番号申請書の受付時間》

受付時間： 10：00～18：00（土、日、祝日及び弊社休業日を除く）

【携帯電話で登録する方法】

ご使用の携帯電話のQRコード読取機能を使って登録する場合は、画面に表示されていますQRコードを携帯電話のカメラにて撮影して下さい。携帯電話からインターネットに接続し、携帯電話画面に受付番号が表示されます。

表示された番号を画面の入力欄に入力して「登録」ボタンをクリックして下さい。

また、画面解像度等により読み取れない場合は「受付番号申請用紙を印刷する」をクリックして印刷された用紙にて記載されているQRコードにてお試しください。


ご不明な点等がございましたら弊社までお電話にてご連絡下さい。

操作の流れ

3DentMOVIE のセットアップが終了しましたらお読み下さい。

3DentMOVIE を効率よくご利用頂くための操作の流れを説明します。


1. テキストの追加、静止画の保存先の確認を行います。【初期設定 11 ページ】

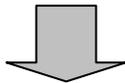

2. 3DentMOVIE を起動します。【メイン画面の説明 14 ページ】



3. ムービーの選択を行います。
再生するムービーをご選択下さい。【ムービーの再生 18 ページ】

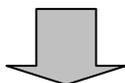

4. ドローイングを行う。
ムービーにテキストやオブジェクトを書込みます。【オブジェクトやテキストを書込む 20 ページ】



5. ムービーを静止画として取込む。
ドローイング後の画像を静止画として保存します。【静止画として取込む 22 ページ】



6. スライドショーを見る。
静止画として保存を行ったムービーをスライドショーで見ることが出来ます。【スライドショーを見る 23 ページ】



7. 保存・印刷を行います。
必要に応じて静止画として保存を行ったムービーの保存・印刷を行います。【保存・印刷 24・25 ページ】

初期設定について

3DentMOVIE 起動時の設定を変更することが可能です。

以下の設定を変更すると、次回からの 3DentMOVIE 起動時に反映されます。



1. 画面左下 **スタート** → **すべてのプログラム**
→ **Narcohm** → **3DentMOVIE** → **初期設定** を
クリックします。



2. 3DentMOVIE 初期設定画面が表示されます。
各項目の設定を行うことが可能です。



3. 初期の設定となりますので、使用する頻度が高いものを選択して下さい。

描 画 色：ドローイング色を選択します。

線 の 太 さ：ドローイング線の太さをご選択します。

再 生 速 度：ムービーの再生速度を選択します。


描画サイズ：

- ・ノーマル→ ムービーをノーマルで表示します。
- ・フィット→ それぞれの画面に適したサイズで表示します。

ループ再生：

- ・停 止→ 選択されたムービーを再生後停止します。
- ・ル ー プ→ 選択されたムービーを繰り返し再生します。

※描画色・線の太さ・再生速度については 3DentMOVIE 画面上でも変更可能です。

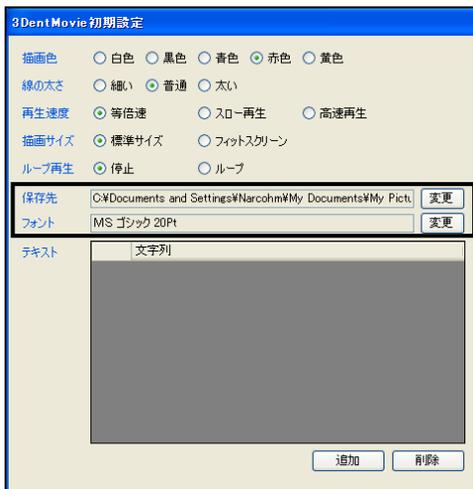

保存先：静止画の保存先を変更出来ます。

フォント：テキスト挿入時のフォントを変更出来ます。




テキスト：テキスト文字を登録することが可能です。

① 追加をクリックします。



② 挿入された行をクリックし、テキストを入力します。
入力後、**Enter**を押して決定して下さい。

<テキストを削除する場合>

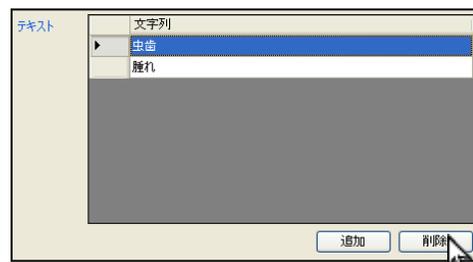

削除するテキストをクリックし、青く反転した状態で
右下 **削除** をクリックして下さい。



4. 分類名称の変更、削除等を行うことが可能です。


【カスタマイズ機能 27 ページ】



5. 全ての作業が終了しましたら  をクリックして、3DentMOVIE を起動して下さい。

3DentMOVIE が起動中の場合は再起動して下さい。


メイン画面の説明

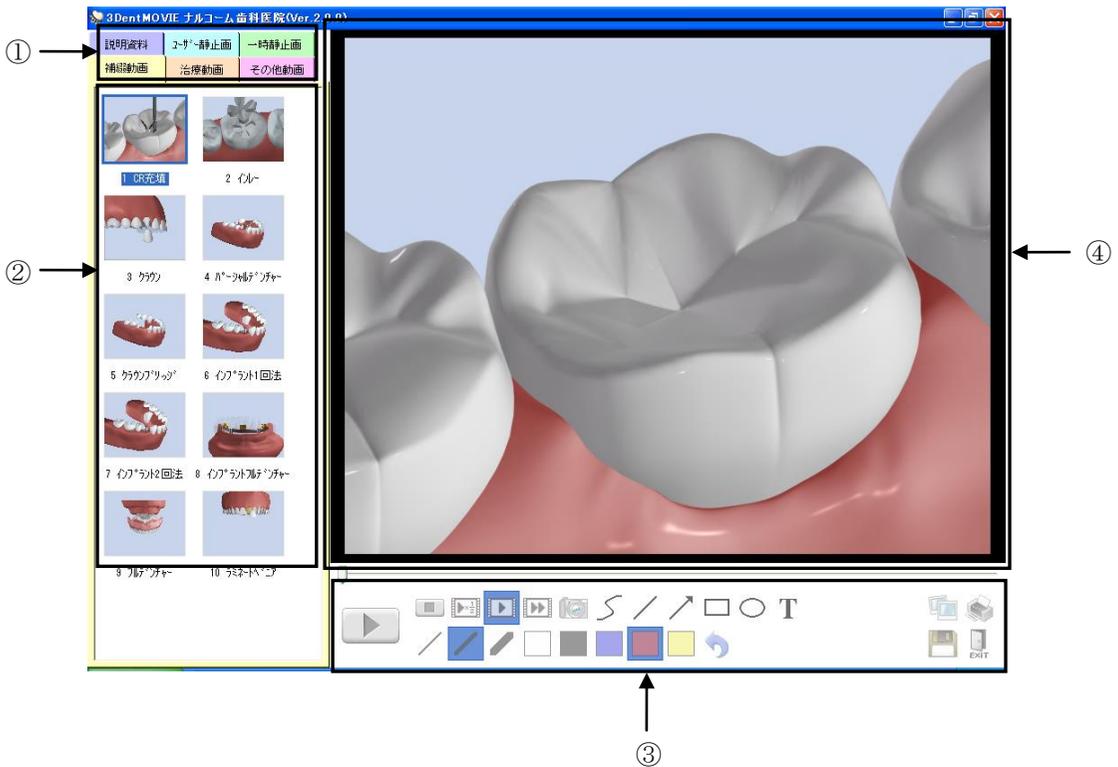

①タブ選択：治療や静止画等をタブをクリックして選択出来ます。(タブのカスタマイズ 27 ページ)

②ムービー項目：ムービーや静止画が表示されています。

③メニューアイコン：

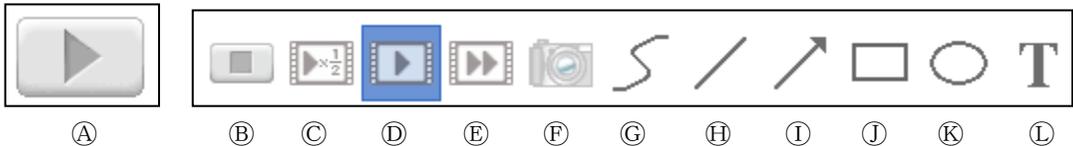

Ⓐ再生：ムービーが選択されている状態でクリックすると再生されます。

(再生中は一時停止ボタンに変わります。)

Ⓑ停止：ムービー再生時にクリックすると止まります。

Ⓒ1/2倍速：1/2倍速のスピードで再生します。

Ⓓ等倍速：通常の時間で再生します。

Ⓔ2倍速：2倍速で再生します。

Ⓕキャプチャ：表示しているムービーや静止画を静止画として保存します。

Ⓖ自由曲線：ムービーに自由に曲線を描けます。

Ⓖ直線：ムービーに直線を描けます。

Ⓘ矢印：ムービーに矢印を描けます。

Ⓧ四角：ムービーに□を描けます。

Ⓨ円形：ムービーに○を描けます。

Ⓦテキスト：登録したテキストの入力を行えます。



⑭線の太さ：線の太さの変更を行えます。



⑮描画色：描画色の変更を行います。



⑯戻る：オブジェクト、テキストを書込む前の状態に戻ります。



⑰スライドショー：ムービーより取込んだ静止画のスライドショーを行えます。

⑱印刷：ムービーより取込んだ静止画の印刷を行います。

⑲ファイルに保存：ムービーより取込んだ静止画をファイルへ出力します。


⑳Exit：アプリケーションが終了します。

④表示欄：選択されたムービーや静止画を表示します。


3DentMOVIE 起動方法



1. デスクトップ上の 3DentMOVIE アイコンをWクリックします。

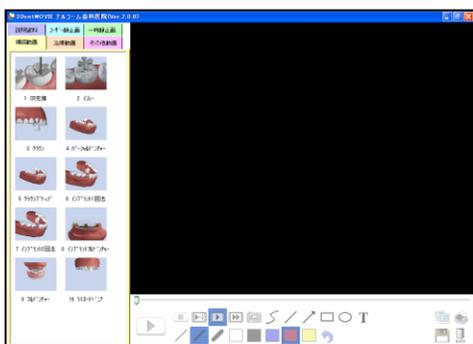


2. 画面が表示されます。

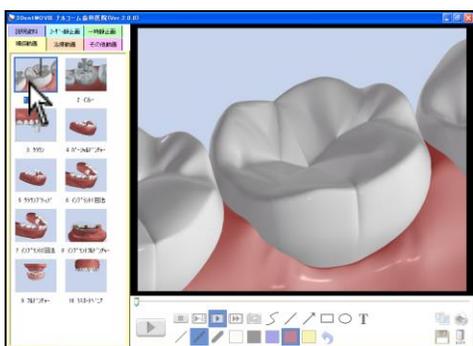


3. 左側の一覧から再生するムービーをご選択下さい。
ムービーが再生されます。

タブの使用方法について

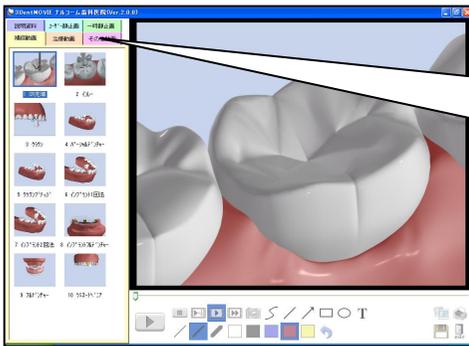

1. 3DentMOVIEを起動し、左上のタブを選択します。

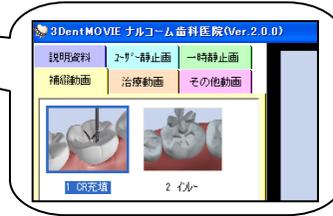

<初期状態>

●補綴動画

CR 充填・インレー・クラウン・パーシャルデンチャー・クラウンブリッジ・インプラント1回法
インプラント2回法・インプラントフルデンチャー・フルデンチャー・ラミネートベニア

●治療動画

根管治療(ボルト)・根管治療・SRP・PMTC・親知らずの抜歯・オフィスホワイトニング・ホームホワイトニング

●その他動画

歯の構造・虫歯の進行・歯周病の進行・歯の萌出・親知らず・歯の喪失・感染根管・顎関節症
バイオフィルムの形成・歯肉炎

●説明資料

乳歯の萌出と抜ける時期・永久歯の萌出時期・親知らずの種類・二次カリエス・口腔内 pH 値の変動
デジタルレントゲンの被曝量・レーザー治療のメリット・ホワイトニング・軽度な虫歯の詰め物(奥歯)
・深い虫歯の被せ物(前歯)・深い虫歯の被せ物(奥歯)・補綴物の種類・医療費控除A・医療費控除B


●ユーザー静止画

医院様で初期設定画面にて画像を登録して頂いた場合に表示されます。(静止画を登録する31ページ)


●一時静止画

キャプチャリングを行った場合に表示されます(静止画として取込む22ページ)

2. 左側の一覧からムービーや静止画を選択して下さい。

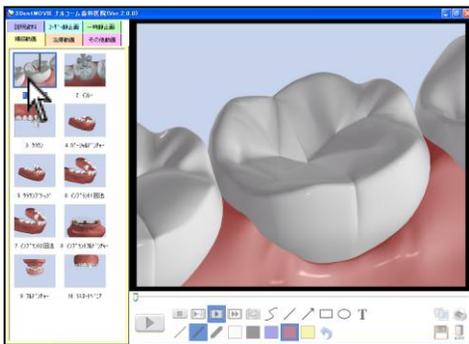

ムービーの再生・一時停止・停止について

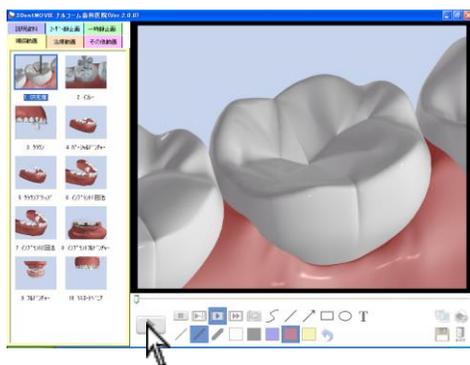

<再生・一時停止について>


ムービーの再生と一時停止は同じボタンで行います。

再生中は  表示になります。

一時停止中は  表示になります。



 をクリックすると、 に変わり、再びクリックすると  に戻ります。

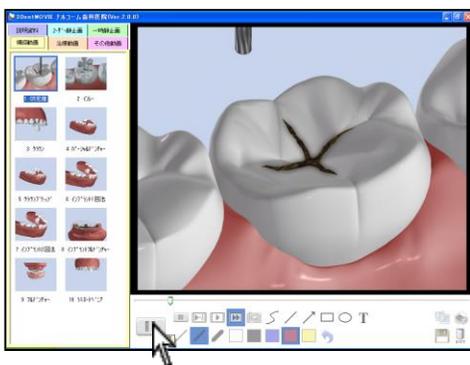


<ムービーの停止について>

再生中、一時停止中に  をクリックするとムービーの最初に戻って停止します。

テンキー対応について

3DentMOVIE をテンキーで操作することが可能です。


また、コンピュータに付属のテンキーでも操作することが可能です。

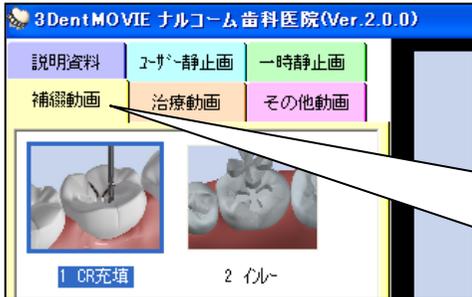

1. 3DentMOVIE を起動し、左上のタブを選択します。
キーボード **+** を押すと隣のタブに移ります。
- を押すと 1 つ前のタブに移ります。

<タブを切り替える場合>

+ または **-** 押す

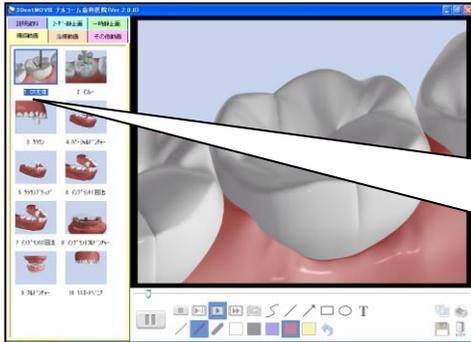


2. ムービーを選択します。
ムービー名の左側の数字を打ち、**Enter** を押して下さい。

<CR 充填を再生したい場合>

1 と **Enter** 押す



ムービーの速度調節について

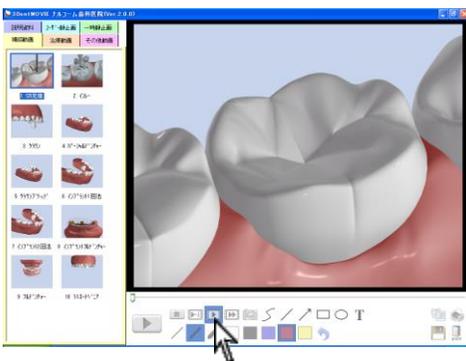

<再生速度>



: 通常の 1/2 倍速で再生します。



: 通常のスピードで再生します。




: 通常の 2 倍のスピードで再生します。


速度を選択してから再生する場合は、**速度** ボタンをクリック後  ボタンをクリックして下さい。

再生中に速度を変更したい場合は、再生中に **速度** ボタンをクリックして下さい。

オブジェクトやテキストを書込む

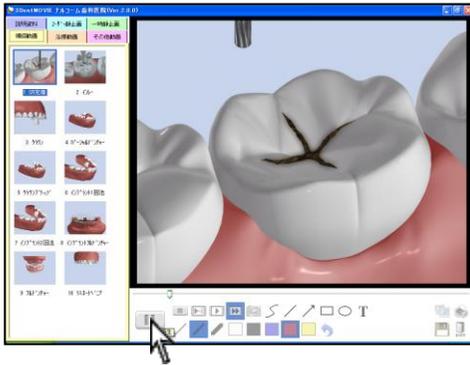


1. ムービーを再生します。


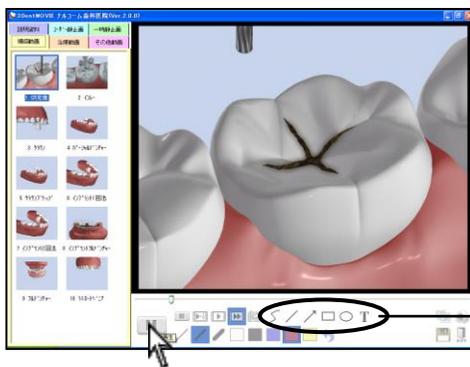


2. 書き込みたい場所で  をクリックし、ムービーを一時停止させます。


※ オブジェクトやテキストをクリックしても一時停止します。

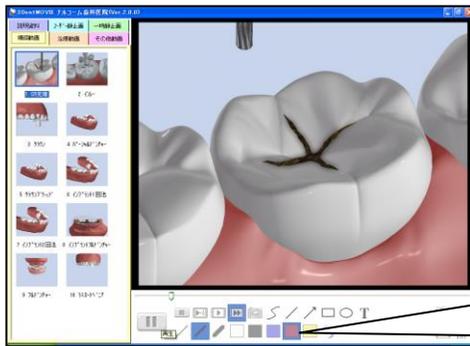

3. テキストの色、文字の太さを選択下さい。

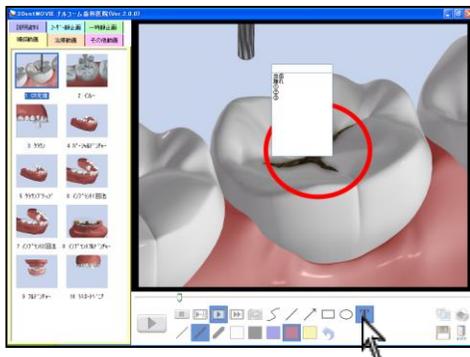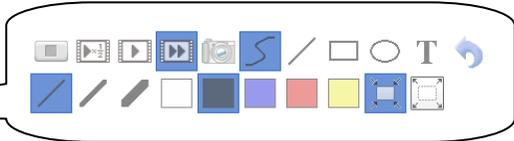

4. 文字を書き込む場所でマウスをクリックします。
登録してある文字を選択するか、直接入力を行います。
【テキストの登録 初期設定 11 ページ】

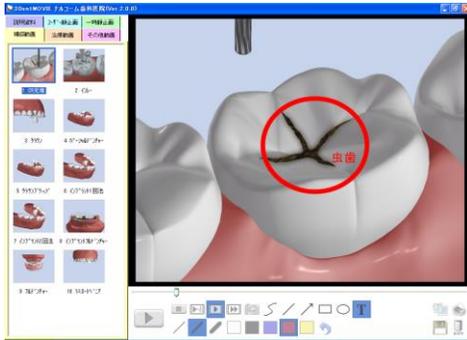


描いたものを移動することは出来ません。




(戻る) をクリックすると描いたものを消すことが可能です。

5. ムービーにオブジェクトや文字が入力されます。
書き込み後のオブジェクトや文字は移動出来ません。

静止画として取込む

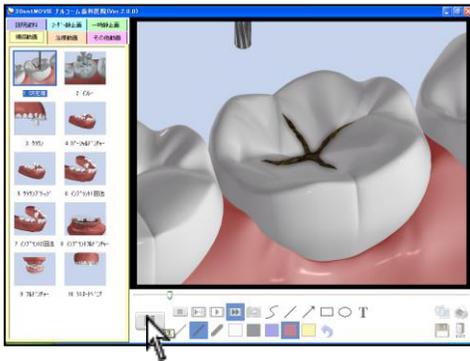


1. ムービーを再生します。

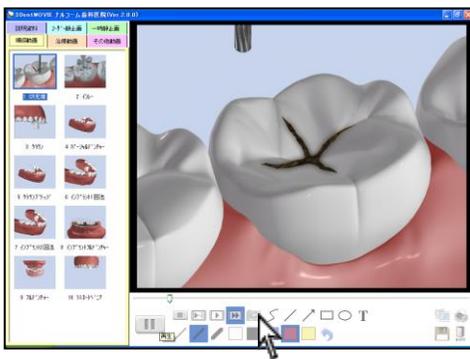

2. 静止画として保存したい場所で  をクリックします。

 をクリックしてから  をクリックしてもキャプチャリングを行えます。

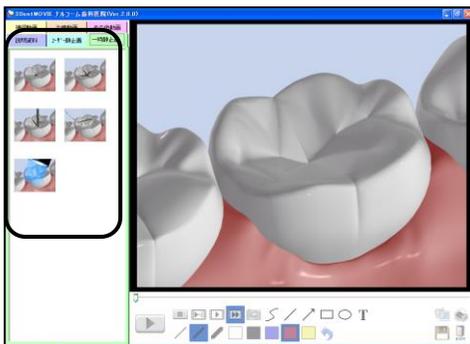


3. 一時静止画欄にキャプチャ画像が表示されます。

オブジェクト、テキスト入力後に  をクリックすると描いた状態でキャプチャリングが可能です。



スライドショーを見る

静止画として取込んだ画像をスライドショーとして見る事が可能です。


1. 静止画として画像を取込んで下さい。
(静止画として取込む 22 ページ)

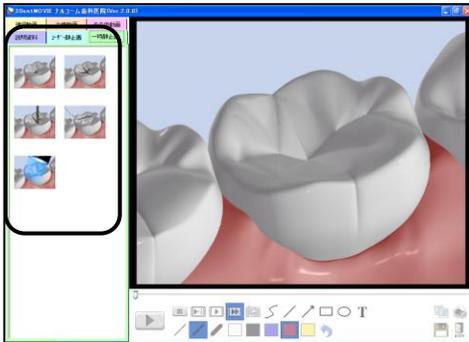

2. スライドショーで見る画像をクリックします
スライドショーボタン  をクリックして下さい。
※ 選択されていない場合には、全ての画像が対象となります。

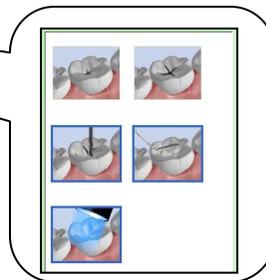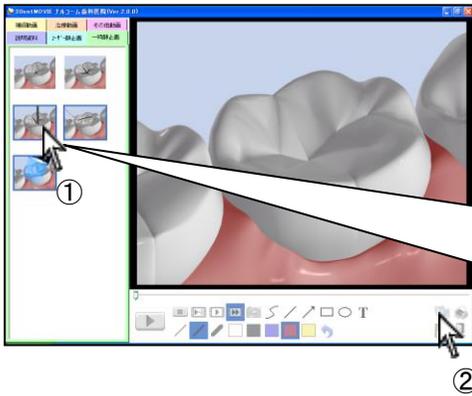

3. 画面が切り替わります。

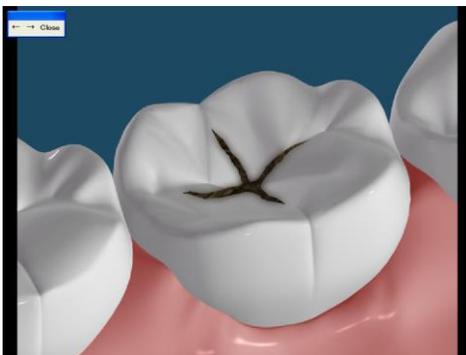


左上の矢印ボタンでスライドを送ることが出来ます

→ : 進む


← : 戻る

Close : スライドショーを閉じる


静止画として保存する

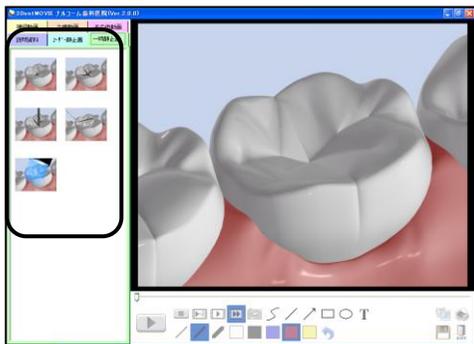


1. 静止画として画像を取込んで下さい。
(静止画として取込む 22 ページ)

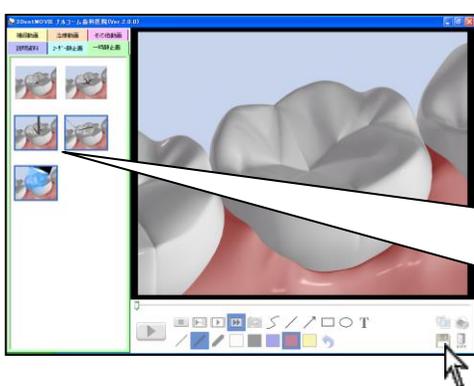

2. 保存ボタン  をクリックして下さい。
選択されている静止画のみを保存します。
(1つも選択されていない場合には全ての静止画を保存します。)

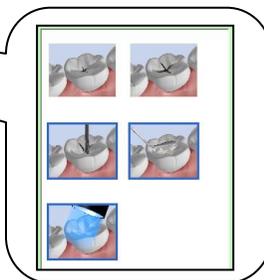


- 保存後、左メッセージが表示されますので **OK** をクリックして閉じて下さい。

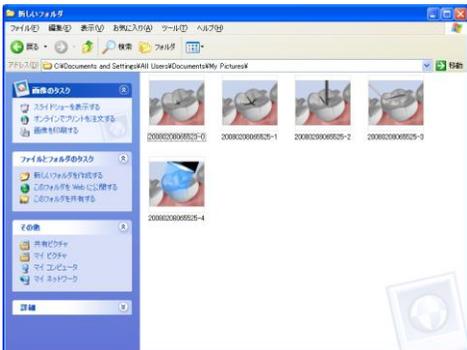


3. 保存せずに 3DentMOVIE を終了した場合は、静止画は削除されます。

(保存先 初期設定 11 ページ)


静止画の印刷を行う

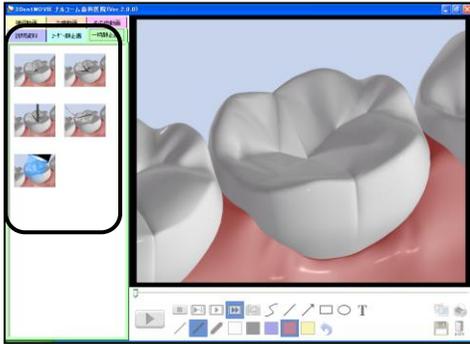


1. 静止画として画像を取込んで下さい。
(静止画として取込む 22 ページ)

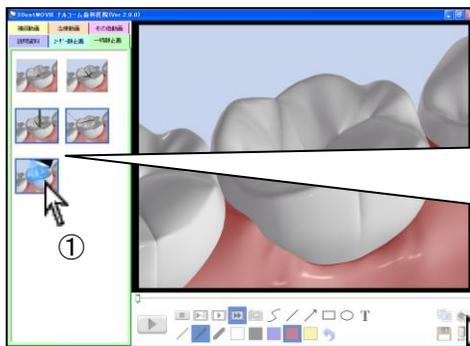

2. 印刷したい画像をクリックします
印刷ボタン  をクリックして下さい。

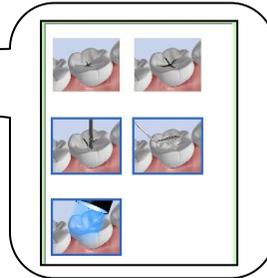

②

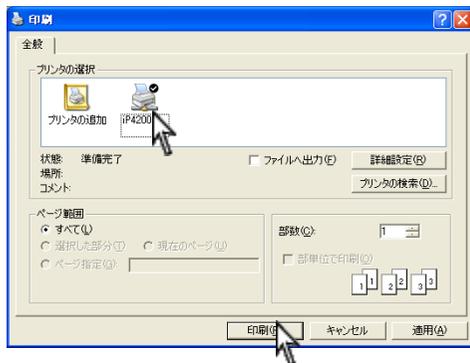


3. 印刷画面が表示されます。
印刷するプリンタをクリックして **印刷** をクリックして下さい。

- 1 枚印刷： 選択された用紙のほぼ真ん中に印刷されます。縮小、拡大の必要なく 選択された用紙サイズに合わせて印刷が行われます。
- 複数枚印刷： 1 枚に 4 つの画像を印刷します。


サイズを変更する際はプリンタの詳細設定から用紙サイズのみを変更して下さい。

※ 用紙サイズの変更については各プリンタメーカー様へお問い合わせ下さい。

3DentMOVIE の終了方法

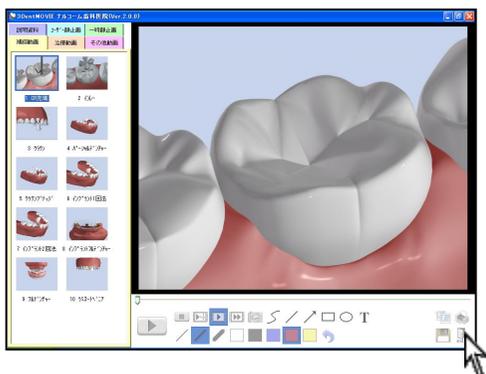

1. 画面右下  をクリックまたは、右上  をクリックして終了します。

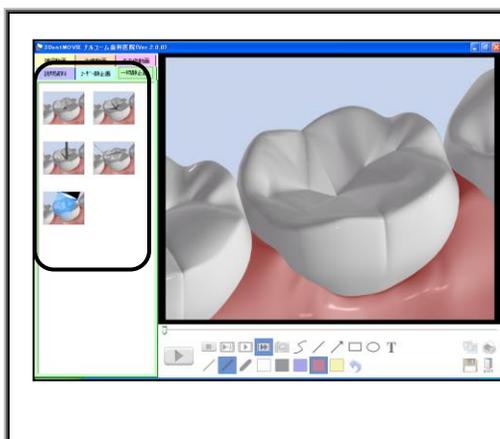

静止画として取り込んだ画像は 3DentMOVIE を終了すると削除されます。

必要なものは保存を行って下さい。


(静止画として保存する 24 ページ)

カスタマイズ機能

ムービーや静止画のカスタマイズを行うことが可能です。

削除したムービーや静止画は、初期化しない限り元に戻せませんのでご注意ください。

（初期化した場合は登録した画像も削除されます）

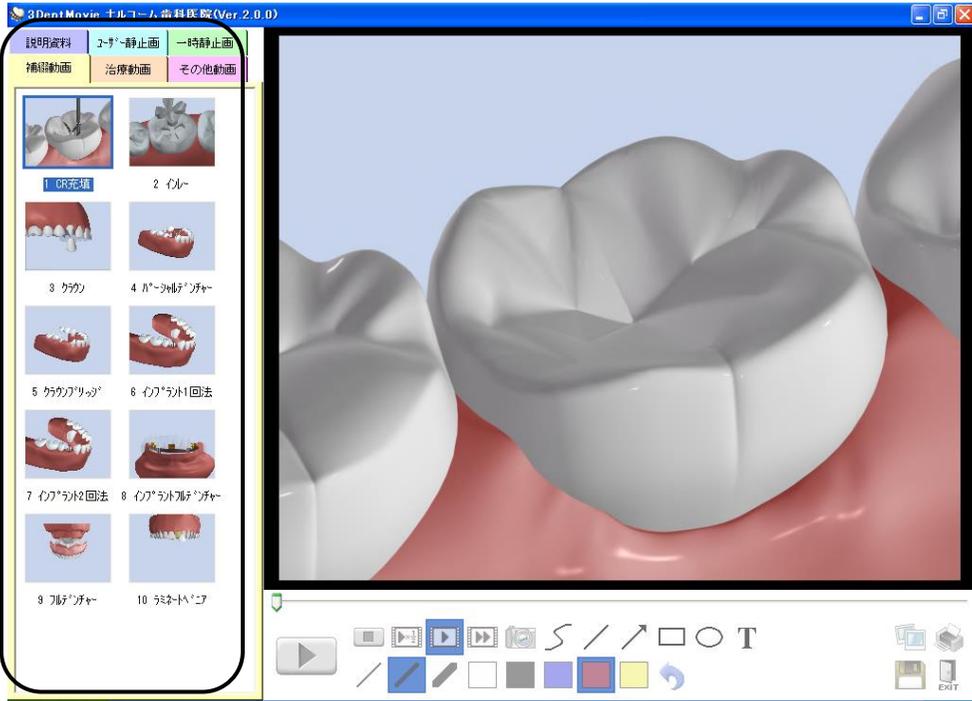

<削除する>

1. 3DentMOVIE を終了して下さい。

画面左下 **スタート** → **すべてのプログラム** →
Narcohm → **3DentMOVIE** → **初期設定** をクリックして
 下さい。



カスタマイズ機能（削除する）



2. 初期設定画面が表示します。



3. ムービー/静止画設定欄から削除する動画を探します。



4. 動画の名称を再度確認し、右側「削除」をクリックして下さい。




5. 宜しければ「はい(Y)」をクリックして下さい。

カスタマイズ機能（ムービーの順番を変更する/分類を変更する）

<ムービーの順番を変更する>


1. 順番を変更する場合には、右側 ▲・▼ をクリックし並び替えを行って下さい。

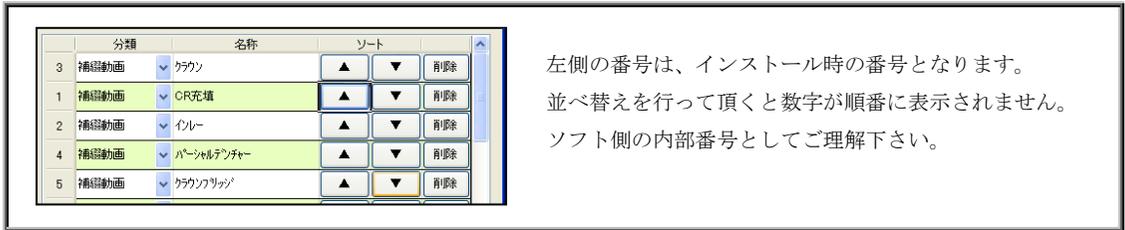

<分類を変更する>

治療ムービーをその他に移動する等のカスタマイズを行うことが可能です。

1. 分類を変更するムービーの左側 ▼ をクリックし、分類を選択して下さい。

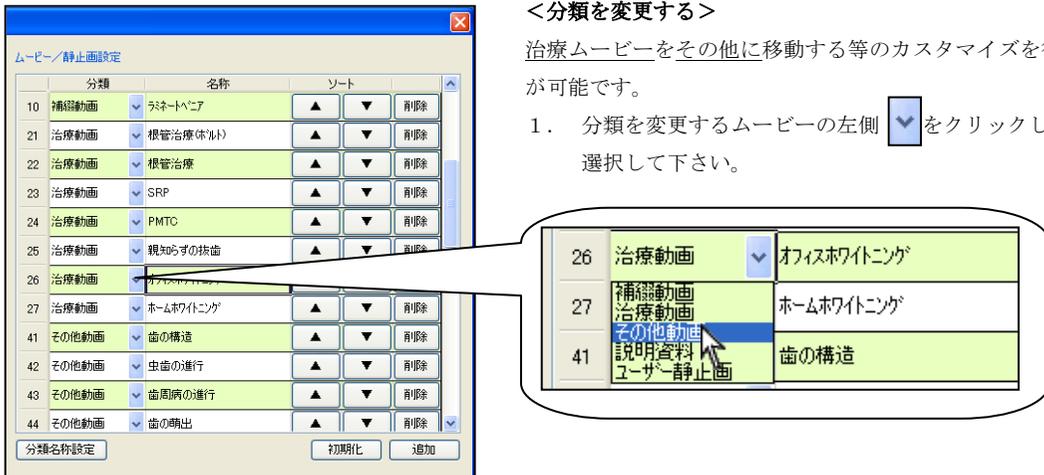


カスタマイズ機能（分類名称を変更する）





<分類名称を変更する>

1. 「分類名称設定」をクリックして下さい。

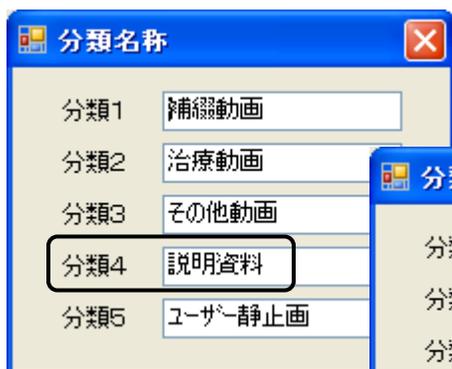

2. 分類1から分類5までの名称を変更出来ます。変更後、右上  をクリックして画面を閉じて下さい。

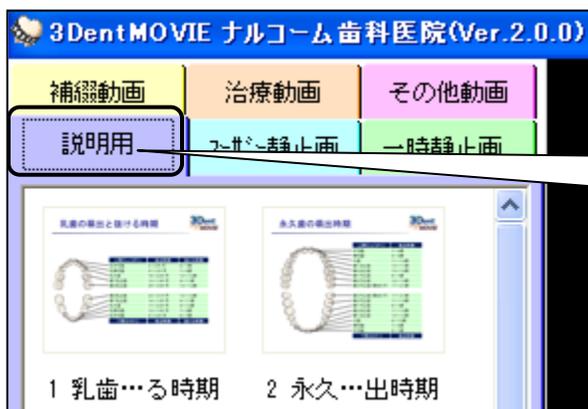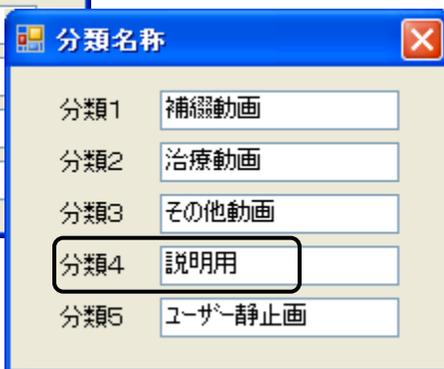

タブの名称が変更されます。


<静止画を登録する>

お持ちのお写真を 3DentMOVIE 上に登録することが可能です。
動画は取りこめませんので、ご了承下さい。

1. 画面右下 **追加** をクリックして下さい。



2. 取込む画像を選択し、 **開く** をクリックして下さい。

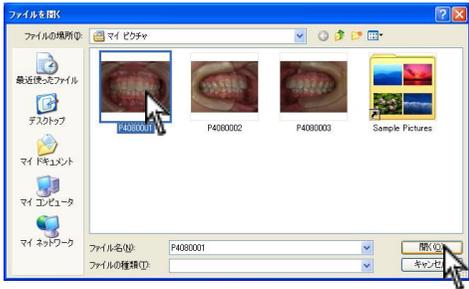

<画像の種類について>
取込むことが可能な画像は、JPEG・TIFF・ビットマップ
とさせて頂いております。

3. 名称を入力後、 **Enter** をクリックして下さい。



※項目名称を変更する場合には、30 ページをご参照下さい。
※ムービー順を変更する場合には、29 ページをご参照下さい。

<初期化を行う>

インストール時の状態に戻します。

削除したムービーは、戻りますがご自身で登録した画像は削除されますのでご注意ください。

1. 画面右下 **初期化** をクリックして下さい。



2. 宜しければ **はい(Y)** をクリックして下さい。



3. **OK** をクリックして下さい。
初期設定画面が閉じます。



登録解除方法について

本製品は1ライセンスにつき1台のコンピュータとなっております。2台以上のコンピュータへのインストールは行えません。

3DentMOVIEを使用するコンピュータを変更する場合は以下の作業を行って下さい。


<コンピュータ破損の場合>

運用中に、コンピュータが破損してしまった場合は登録解除の手続きが行えませんが、その場合はインストールCDの中に【登録解除申請書】がございます。印刷しご記入の上、弊社までFAXにてご送付下さい。弊社にて登録解除後、完了の返信をご送付させていただきます。届き次第別のコンピュータへインストールを行って下さい。

ご不明な点がございましたら、インストール前に弊社へご連絡下さい。



1. 画面左下 **スタート** → **すべてのプログラム**
→ **Narcohm** → **3DentMOVIE** → **登録解除** をクリックします。

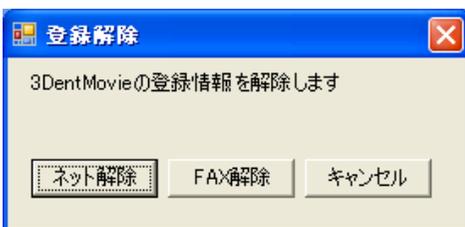


2. 登録解除画面が表示されます。

【インターネットでの登録解除】




ネット解除 をクリックし、確認画面は OK をクリック
します。

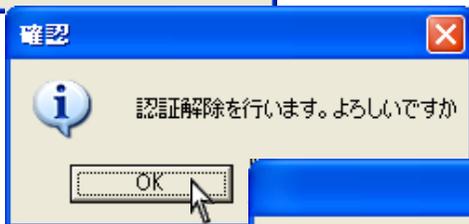

認証解除が完了しましたと表示されましたら OK をクリックして下さい。

手続きは完了です。別のコンピュータへインストールを行い通常通り登録して下さい。

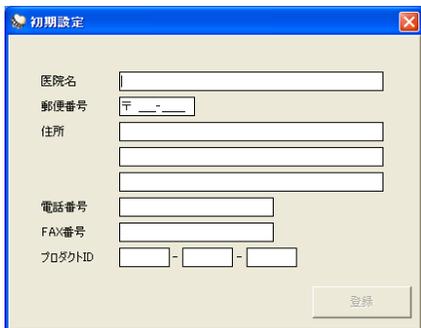


【注意】

3DentMOVIE は削除されません。



3DentMOVIE アイコンをWクリックすると初期設定画面が表示されます。

再度登録を行えば利用することも可能です。

【FAX での登録解除】

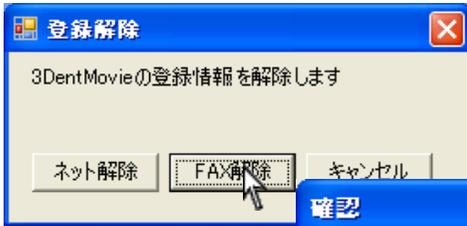


FAX 解除 をクリックし、確認画面は **OK** をクリックします。

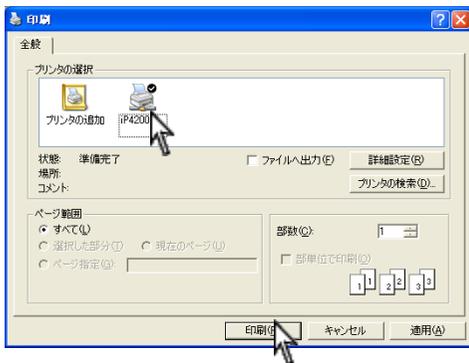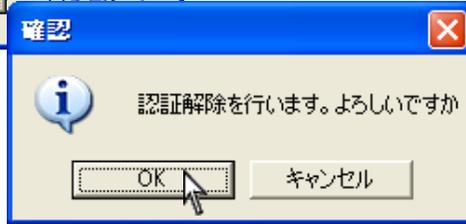

プリンタに用紙がセットされているかご確認下さい。
印刷をクリックした時点で認証が解除されます。
印刷をするプリンタを選択し、**印刷** を行って下さい。



認証解除が完了しましたと表示されましたらメッセージは **OK** をクリックして閉じて下さい。

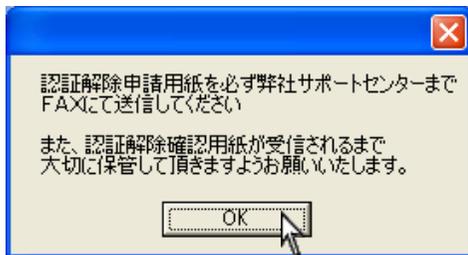

印刷後左メッセージが表示されますので **OK** をクリックして閉じてください。
印刷された**認証解除申請用紙**を弊社へご送付下さい。
FAX: 047-364-7657
※印刷を行った時点で、認証が解除されます。

トラブルシューティング

【インストール関係】


- Q 1 : インストールの場所はどこにすれば良いですか？
- A 1 : 通常インストール先は C:\¥Narcoh¥3DentMOVIE です。出来る限り変更をしないで下さい。
- Q 2 : インストールウィザードの画面から進まない。
- A 2 : 3DentMOVIE に必要なものを確認しています。そのままお待ち下さい。(最大 15 分程度)
- Q 3 : 初期設定の医院情報はどこまで入力する必要がありますか？
- A 3 : 弊社に登録するユーザー情報です。ご質問をお受けする際に必要となる為、出来る限り入力して下さい。
- Q 4 : 複数台のコンピュータにインストール出来ますか？
- A 4 : 1 台につき 1 ライセンスです。複数台のコンピュータでご利用を希望される場合は必要なライセンス数をご購入下さい。
- Q 5 : インストールしましたが、別のコンピュータで運用したい。
- A 5 : インストールしたコンピュータのライセンスを解除する必要があります。登録解除 33 ページをご参照下さい。

【運用関係】

- Q 1 : ムービーの動きがスムーズではない。
- A 1 : 2 ページに記載の動作環境に一致していても動作に違いがある場合がございます。ムービーの為、コンピュータのスペック、グラフィック性能等に非常に左右されます。
- Q 2 : 印刷は A4 のみですか？
- A 2 : A4 サイズ以外のハガキサイズなどにも印刷可能です。縮小、拡大の必要なく選択された用紙サイズのみを変更して下さい。


Q 3 : Windows Vista においてメッセージが表示される。

A 3 : 下記作業にて回避して下さい。

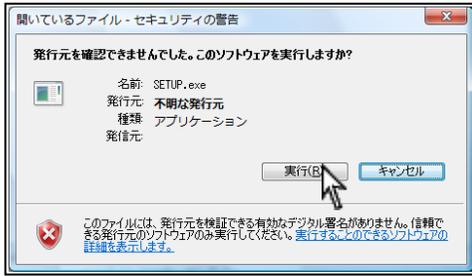

セットアップを行う際などに左画面が表示される場合がございます。

実行 (R) をクリックして下さい。

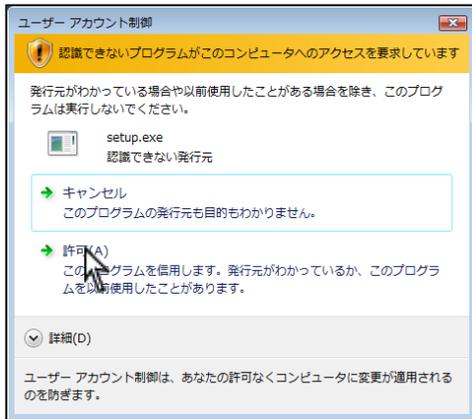

インストールまたは設定中に左画面


【ユーザーアカウント制御】が表示されます。

許可 (A) をクリックして下さい。

Q 4 : Windows Vista にてパスワードを聞かれる。

A 4 : 現在ログインしているユーザーが標準ユーザーです。インストール等の権限がない状態ですので管理者のパスワードを入力後、**OK** をクリックして頂くか、管理者権限でログインインストール等を行って下さい。

管理者権限が必要な箇所は 3 ページで記載しております。

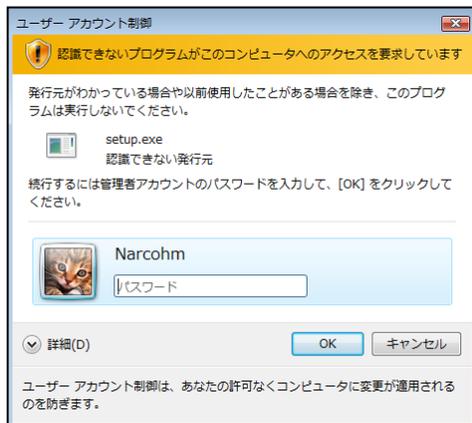

お問い合わせ先

お問い合わせ先

株式会社ナルコム 〒271-0091 千葉県松戸市本町 20-8 松戸本町第2ビル7F

【サポートダイヤル 本製品の操作上のお問い合わせ】	
TEL	047-365-3010
月曜日～金曜日（土・日・祝日・弊社休業日を除く） 10:00～18:00	
【サポートFAX】	
FAX	047-364-7657
【サポートMAIL】	
Mail	info@narcohm.co.jp
【サポートHP】	
URL	http://www.narcohm.co.jp/

※本製品に関する質問事項以外についてはお答えしかねますので予めご了承下さい。

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
2. 本書の内容について、予告なく修正、変更することがありますが、ご了承下さい。
3. 本製品仕様を改良のため予告なく変更することがありますがご了承下さい。
4. 本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さい。