

患者管理支援ソフト

達人プラス4

Version 4

ドクターと患者さんをつなぐ
デジタルコミュニケーションツール

Version4.0.0.0 から Version4.0.1.0 変更点

- ・ 動画保存機能認証登録の方法
- ・ TrophyWindows と口腔内カメラに使用について




動画保存機能認証登録の方法について

達人プラスガイドブック 写真管理ビデオキャプチャにおける動画保存機能認証解除 10-7 ページが変更致しました。


動画保存機能は独立したメニューとなりましたので下記方法より必要に応じて解除を行って下さい。

また、達人プラス Version4.0.0.0 にて認証解除を行った場合も再度認証解除を行って下さい。

※解除コードは動画を保存する場合にのみ必要となります。撮影のみの場合は必要ありません。

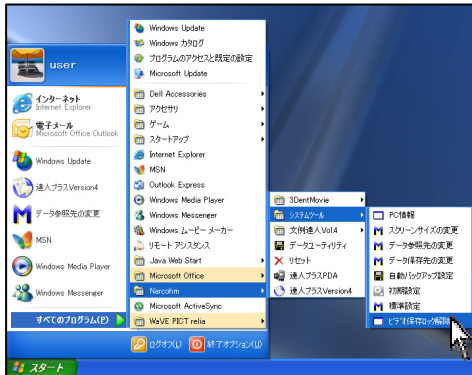

1. 画面左下 **スタート** → **すべてのプログラム** → **Narchohm**
→ **システムツール** → **ビデオ保存ロック解除** をクリックして下さい。

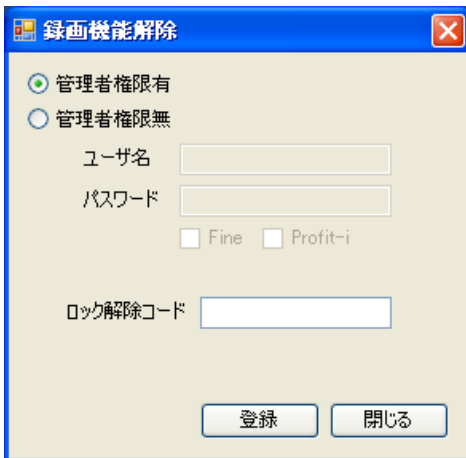

2. 録画機能解除画面が表示されます。
管理者権限があるユーザーの場合は**管理者権限有**に
☒をして3へ

動画保存機能認証登録の方法について

録画機能解除

☐ 管理者権限有

☒ 管理者権限無

ユーザ名

パスワード

☐ Fine ☐ Profit-i

ロック解除コード

登録 閉じる

達人プラスを使用するユーザーが管理者権限でない場合は「管理者権限無」に☑をして下さい。

録画機能解除

☐ 管理者権限有

☒ 管理者権限無

ユーザ名

パスワード

☒ Fine ☐ Profit-i

ロック解除コード

登録 閉じる

株式会社ヨシダ様の WAVE fine の場合は「fine」に☑をして 3へ

録画機能解除

☐ 管理者権限有

☒ 管理者権限無

ユーザ名


パスワード

☐ Fine ☒ Profit-i

ロック解除コード


登録 閉じる

株式会社ヨシダ様の WAVE Profit-i またはアイビュアの場合は「Profit-I」に☑をして 3 へ

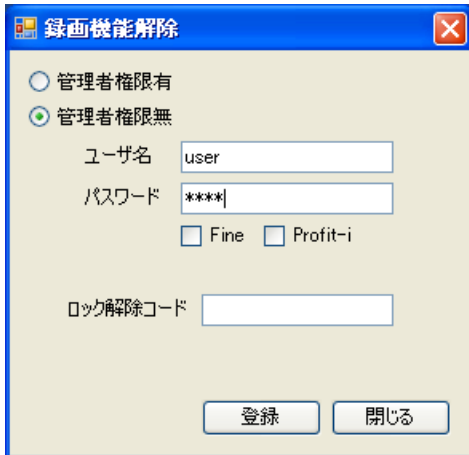


管理者権限がない場合は管理者権限のユーザー名とパスワードを入力して3へ

※ 管理者権限のパスワードがない場合には、管理者権限でログインし、ロック解除コード登録を行って下さい。

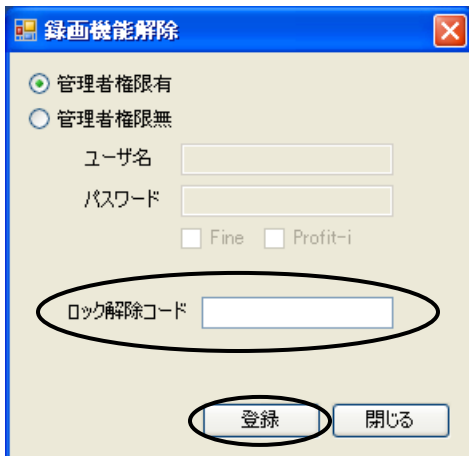

3. 弊社よりご送付致しました動画保存機能使用許可認証番号をご入力の上、登録をクリックして下さい。

※ 認証番号とは動画保存機能使用許可申請書にて申請を行って頂いた場合にのみご送付致しております。

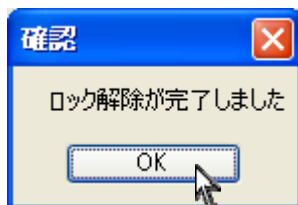


4. 認証完了画面が表示されましたら OK をクリックして下さい。

達人プラス Version4.0.0.0 にて認証解除を行った場合もアップデート後、再度認証解除を行って下さい。

TrophyWindows と口腔内カメラをご利用のユーザー様へ

TrophyWindows がインストールされているコンピュータにて口腔内カメラを接続する場合には下記の設定を行って下さい。

※リリア、STVを含む全ての口腔内カメラが対象となります。

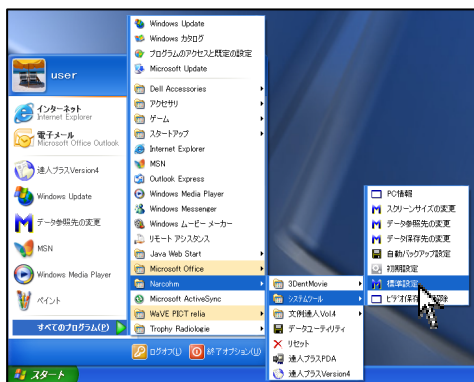

1. 画面左下 **スタート** → **すべてのプログラム** → **Narcohm**
→ **システムツール** → **標準設定** をクリックして下さい。



2. 標準設定が起動します。

TrophyWindows 設定項目で **有効にする** を選択して下さい。


※ TrophyWindows がインストールされていない場合には表示されません。

☒ 有効にする ☐ 無効にする




3. ここからユーザー様の環境によって異なります。


- 株式会社 ヨシダ様の WAVE fine を使用するコンピュータの場合は **4** へ
- 株式会社 ヨシダ様の WAVE Profit-i 又はアイビューアを使用するコンピュータの場合は **5** へ
- 達人プラスを使用するユーザーが管理者権限でない場合は **6** へ
(インストールしたユーザー名と違う場合)
- 達人プラスを使用するユーザーが管理者権限の場合はそのまま右上 **×** で閉じて下さい。

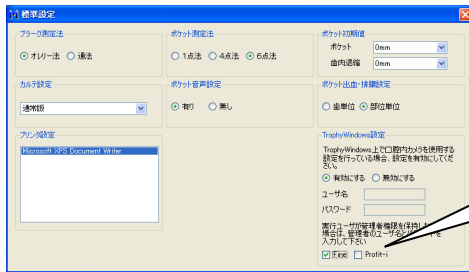


4. 画面右下 **Fine** に ☒ をして右上 で閉じて下さい。
以上で設定は完了です。

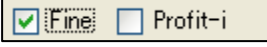

5. 画面右下 **Profit-i** に ☒ をして右上×で閉じて下さい。
以上で設定は完了です。

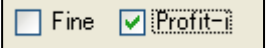

6. 管理者権限がない場合は管理者のユーザー名とパスワードを入力して右上 で閉じて下さい。
以上で設定は完了です。

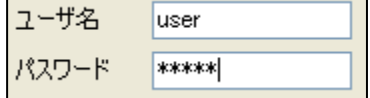

- ※ 管理者のパスワードがない場合には、ユーザー名のみを入力して右上 で閉じて **7へ**






7. 画面左下 **スタート** → **コントロールパネル** をクリックして下さい。




8. 左側の クラシック表示に切り替える をクリックして下さい。


※左の画面と異なる場合は 9へ

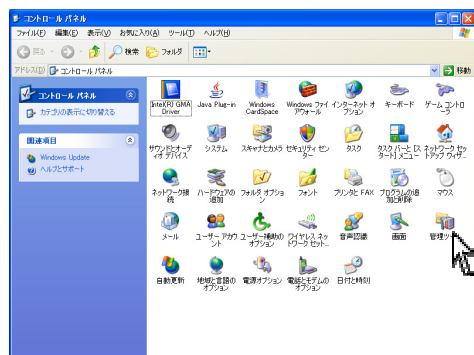


9. **管理ツール** をWクリックして下さい。

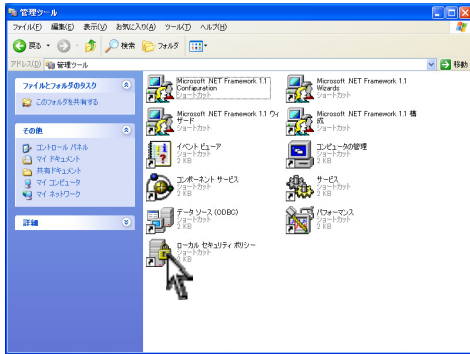

10. **ローカル セキュリティ ポリシー** をクリックして下さい。

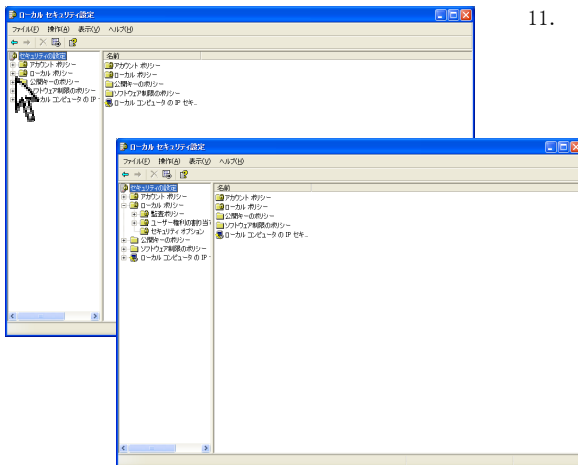


11. **ローカル セキュリティ ポリシー** の左側 **+** をクリックして **-** にして下さい。

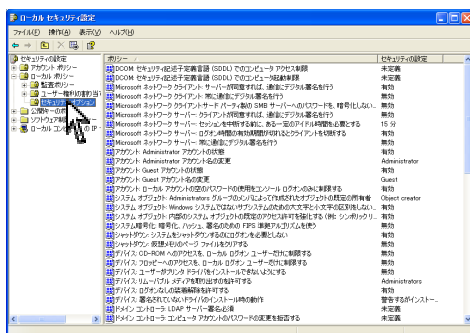

12. **セキュリティ オプション** をクリックして下さい。


TrophyWindows と口腔内カメラをご利用のユーザー様へ

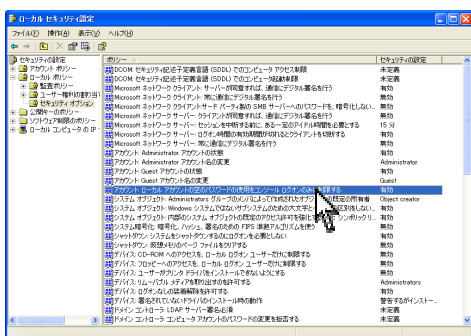



アカウント：ローカル アカウントの空のパスワードの使用をコンソール ログオンだけに制限する 有効

13. 下記のものを探して下さい。

アカウント：ローカル アカウントの空のパスワードの使用をコンソール ログオンだけに制限するをWクリックして下さい。

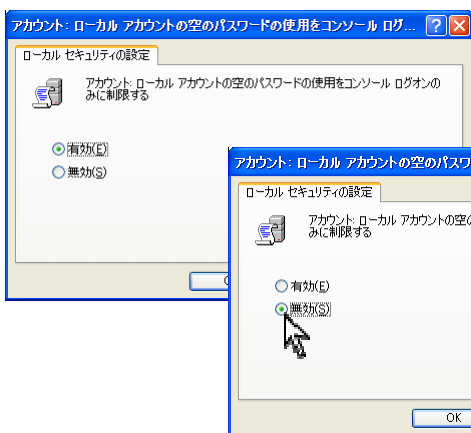

14. 無効に ☒ をして OK をクリックして下さい。

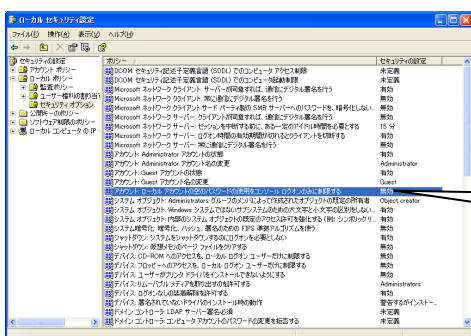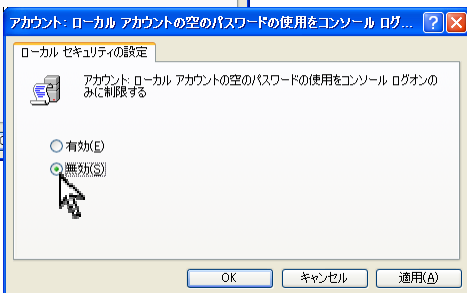

15. 無効になったことをご確認頂き、右上 ☒ をクリックして下さい。

無効

達人プラス Version 4 Guide Book 誤りに関するお詫び


大変申し訳ありませんが、達人プラス Version 4 Guide Book に誤りがございます。

下記にて誤りを訂正させていただきます。大変ご迷惑をお掛け致しますがご了承下さいますようお願い申し上げます。


2-4 ページ：ライセンス変更を行う



1. 画面左下 **スタート** → **すべてのプログラム** → **Narcohlm** → **システムツール** → **初期設定** をクリックして下さい。

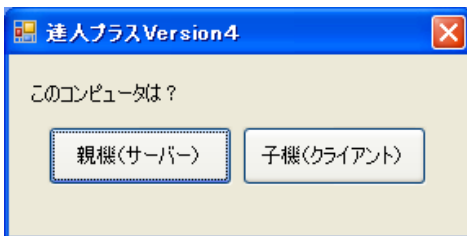

2. このコンピュータは？と画面が表示されます。既に設定されている場合も再度ご選択下さい。

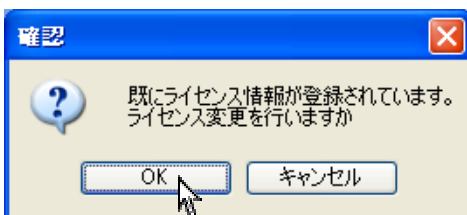

3. 確認画面が表示されますので宜しければ **OK** をクリックして下さい。
※ トライアル版から製品へ切り替える場合は表示されません。

初期設定

医院名: ナルコム歯科医院

郵便番号: 〒 270-2253

住所: 千葉県松戸市日暮

電話番号: 047-311-3600

FAX番号: 047-311-3133

データ保存先: C:\Narcohm\WINDF 参照


カルテ連動: 通常版

プロダクトID: [] - [] - []

アフィリエイトID: [] - []

登録

3. 初期設定画面が表示されますので、**新プロダクトID**を入力して**登録**をクリックして下さい。
※変更等を行わない場合は右上**X**で閉じて下さい。

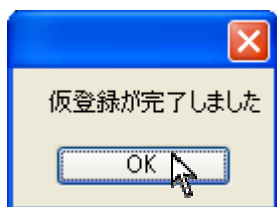

4. 完了メッセージが表示されますので**OK**をクリックして下さい。
※ユーザー登録 2-17 ページを行って下さい。

2-15 ページ：親機のワークグループ名・コンピュータ名がわからない場合



【親機のワークグループ名・

コンピュータ名がわからない場合】

親機にてご確認下さい。

画面左下**スタート** → **すべてのプログラム** →

Narcohm → **システムツール** → **PC 情報** をクリックして下さい。

お問い合わせ先

株式会社ナルコム 〒270-2253 千葉県松戸市日暮 2-3-15 7F

【サポートダイヤル 本製品の操作上のお問い合わせ】

TEL 047-311-2239

月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く） 10:00～18:00

【サポートFAX】

FAX 047-311-3133

【サポートMAIL】

Mail info@narcohm.co.jp

【サポートHP】

URL <http://www.narcohm.co.jp/soft/index.htm>

※本製品に関する質問事項以外についてはお答えしかねますので予めご了承下さい。

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
2. 本書の内容について、予告なく修正、変更することがありますが、ご了承下さい。
3. 本製品仕様を改良のため予告なく変更することがありますがご了承下さい。
4. 本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さい。