

<ユニットサイドにコンピュータがない場合>

移動出来るキャスター付の台に乗せてご使用頂く方法がお勧めです。



使用環境

コンピュータ・・・サーフェス Pro4

USBHUB（サーフェス用）

Pam

無線 2 連フットスイッチ


<ユニットサイドにコンピュータがある場合（ユニットに USB がある場合）>

ユニットに USB ポートがある場合、使用可能かどうかご確認の上ご使用ください。

ヨシダ製エクシード



モリタ製スペースライン EMCIA

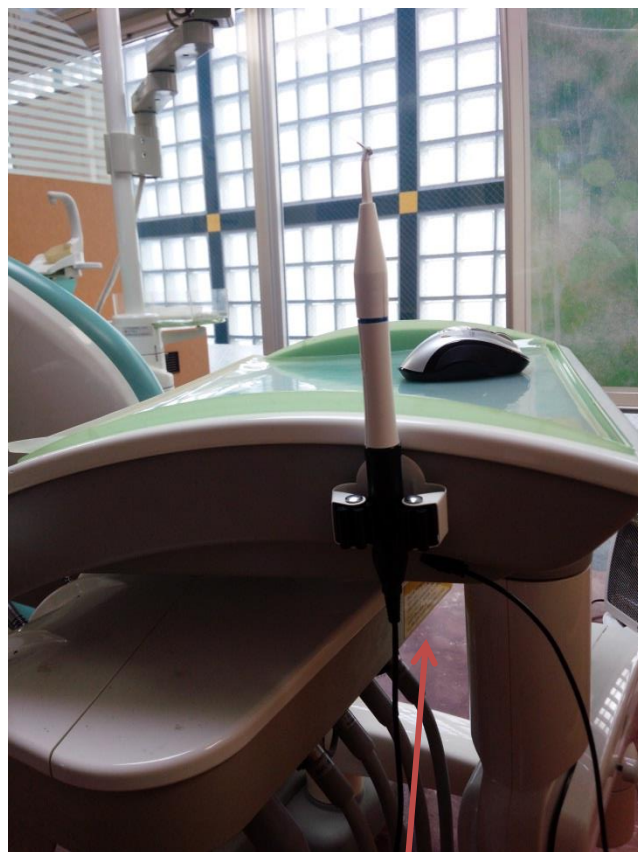

ユニットに付属の USB ポートに Pam を接続しています。

Pam に付属しているフォルダーを両面テープで付けています。



フットスイッチは無線タイプで受信機のみコンピュータに接続しています。


<ユニットサイドにコンピュータがある場合（ユニットに USB がない場合）>



フットスイッチは無線タイプで受信機のみ
コンピュータに接続しています。



コンピュータから USB 延長をユニットに這わせて
いきます。スパイチューブなどがおすすめです。

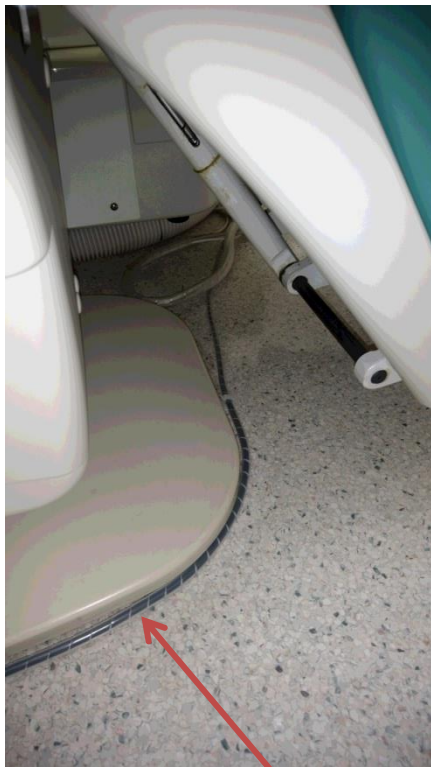

ユニットに沿って這わせていきます。

結束バンド等で固定します。
少しケーブルのゆとりがあるように巻いてください。

USB の接続部を両面テープ等で固定しておくと便利です。



Pam に付属しているフォルダーを両面テープで付けています。