



達人プラス touch

# 設定マニュアル

本マニュアルは達人プラス touch の設定用マニュアルです。

操作方法の確認につきましては別紙の操作マニュアルをご参照下さい。

設定にあたり弊社発行の認証番号が必要となります。

認証番号発行までの流れにつきましては本マニュアル内の「はじめに」をご覧ください。

## 目次

● はじめに	1
● 動作環境及び注意事項	2
● 達人プラスのバージョンを確認する	3
● 達人プラスのアップデート	4
● 達人プラス touch の認証登録	5
● 達人プラスのコンピュータ側の設定	7
● 達人プラス touch の端末設定	9

## はじめに（必ず最初にご確認下さい）

達人プラス touch をご購入頂き、誠にありがとうございます。

必ず最初にご利用手順をご確認下さい。

① 達人プラス touch 認証番号申込書にご記入下さい。

同封の認証番号申込書にご記入の上弊社まで FAX でご送付下さい。

弊社より FAX にて認証番号をご返信致します。



② 達人プラスのバージョンを確認する

バージョンをご確認後、必要に応じてアップデートを行って下さい。(3 ページ)



③ 達人プラス touch の認証登録を行う

達人プラス親機に達人プラス touch を使用する設定を行って下さい。(5 ページ)



④ 達人プラスのコンピュータ側の設定を行う

達人プラスがインストールされている親機と子機に設定が必要です。(7 ページ)



⑤ 達人プラス touch の端末設定を行う

院内の無線に端末を接続し、達人プラス親機に接続後利用開始となります。(9 ページ)

<達人プラス touch のインストールは下記 QR コードからインストールが可能です>



iOS 用



Android 用

### 【動作環境】

#### 達人プラス親機（コンピュータ側）

- ・ Windows8.1
- ・ Windows10
- ・ Windows Server 2012
- ・ Windows Server 2012 R2
- ・ Windows Server 2016

※64 ビットに限ります。

#### 達人プラス touch

- ・ iOS 10.0 以上
- ・ Android 4.4 以上

※達人プラス touch 動作確認機種は iPad, iPad mini, iPod touch です。

### 【画面表示サイズ】


iPad、iPad mini でのご利用時はプラーク、ポケット入力画面は、全額表示となります。  
その他デバイスに関しては、画面サイズにより 1/4 額表示となることがあります。

### 【注意事項】

- ・ 本製品は、達人プラス（コンピュータ側）が無いと使用できません。
- ・ 達人プラスのバージョンは 6.52 以上にアップデートが必要です。
- ・ 達人プラス親機にインストール及び設定を行って下さい。
- ・ 達人プラス Version1、2、3、4、5 ではご利用頂けません。
- ・ 達人プラス親機（コンピュータ側）は、Adobe Acrobat Reader を使用できる環境が必要です。
- ・ 達人プラス touch をインストールまたは更新するには、インターネットに接続し App Store または Google Play からダウンロードが必要です。
- ・ 1/4 額表示の端末では画像印刷はご利用頂けません。全額表示サイズ（iPad 等）の場合のみ 画像印刷機能をご利用頂けます。
- ・ 製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
  
- ・ iPad, iPod touch, iOS, App Store は、Apple Inc. の商標です。
- ・ Android, Google Play は、Google Inc. の商標です。
- ・ Windows, Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及び その他の国における登録商標または商標です。

## 達人プラスのバージョンを確認する

達人プラスを起動しバージョンの確認を行って下さい。

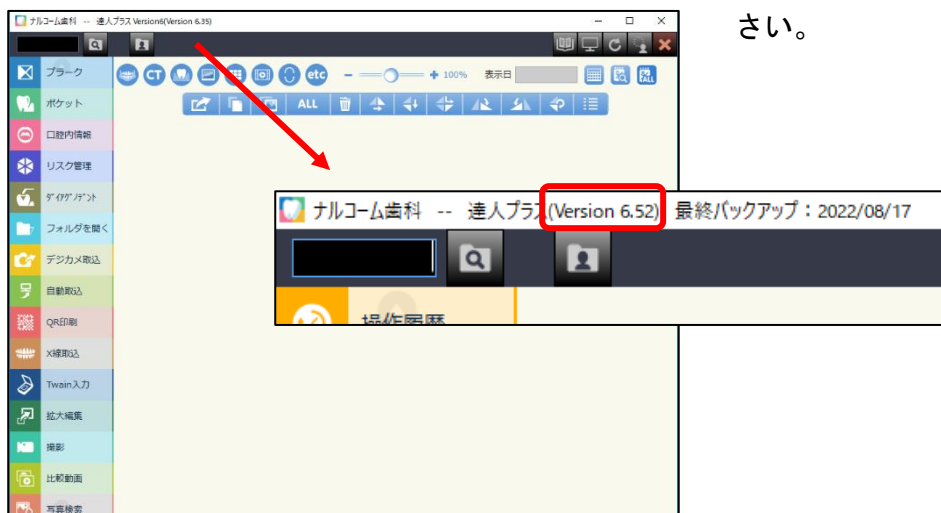



バージョンが 6.52 より前のバージョンの場合は、次ページより達人プラスのアップデートを行って下さい。

バージョンが 6.52 以上の場合は 5 ページへ進んで下さい。

※できる限り最新バージョンでご利用下さい。


## 達人プラスのアップデート

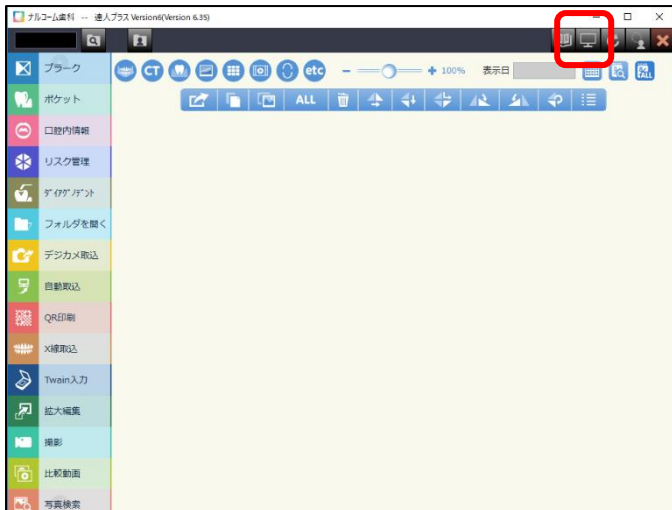

1. 達人プラスを起動し画面右上の  より 達人プラスのホームページにアクセスして下さい



2. ダウンロードより最新バージョンの **達人プラスアップデートプログラム** から **ダウンロード** をクリックして下さい。

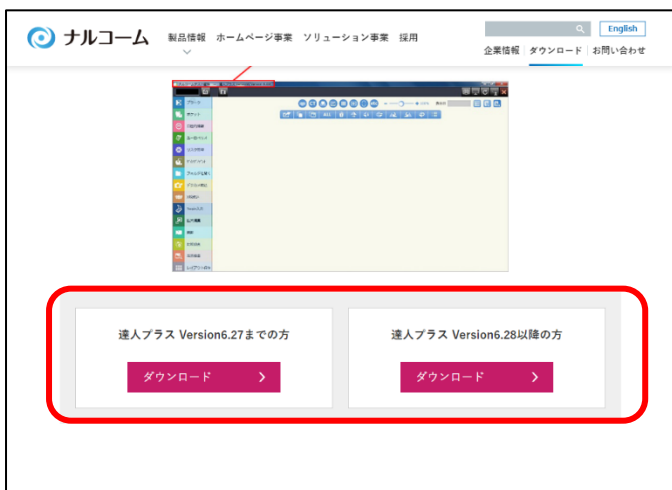

3. 現在のバージョンにあったプログラムをダウンロードして下さい。  
ダウンロード頂いた中にアップデートの手順書もございますのでご確認頂きますようお願い致します。  
※正しいプログラムを適用頂かないと再インストールが必要になることがあります。


## 達人プラス touch の認証登録



1. 達人プラス（コンピュータ側）の親機で **達人プラス各種設定** を起動して下さい。




2. **達人プラス touch 登録** をクリックして下さい。

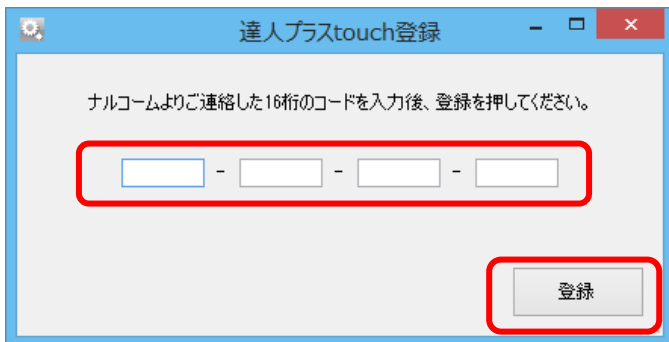


3. 弊社よりご案内しておりますコードを入力し **登録** をクリックして下さい。

※動作環境外のコンピュータの場合はエラーメッセージが表示されます。P. 4【動作環境】をご確認の上、対象のコンピュータで設定を行って下さい。

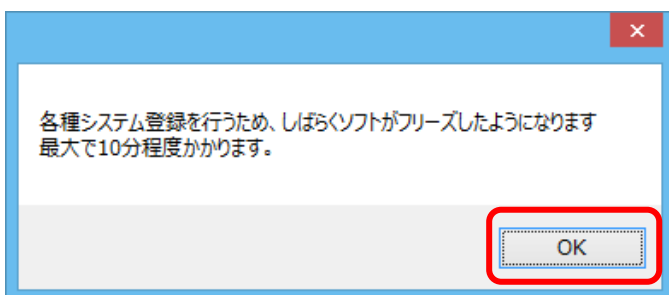

4. **OK** をクリックして下さい。

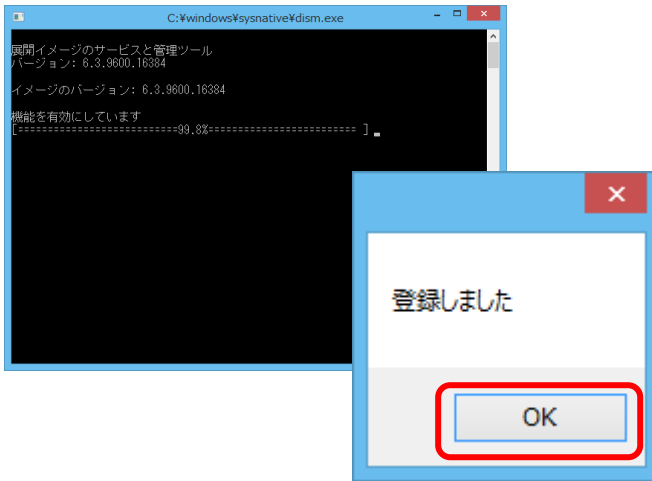

5. 黒い背景の画面が出ましたら画面が閉じるまでお待ちください。登録しましたの表示が出ましたら **OK** をクリックして下さい。




## 達人プラスコンピュータ側の設定




1. 達人プラス（コンピュータ側）の親機で**達人プラス各種設定**を起動して下さい。



2. 達人プラス各種設定の基本タブより**印刷設定**をクリックして下さい。

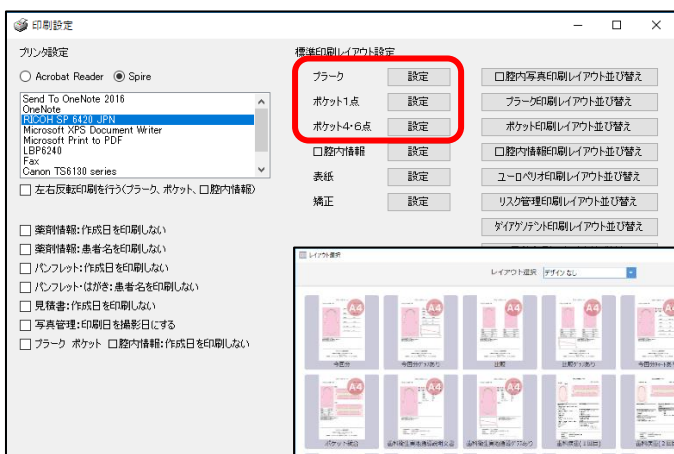


3. プラーク、ポケット1点、ポケット4、6点の標準レイアウトを選択して下さい。  
※達人プラス touch 側でレイアウトを選択することは出来ません。予めご選択下さい。

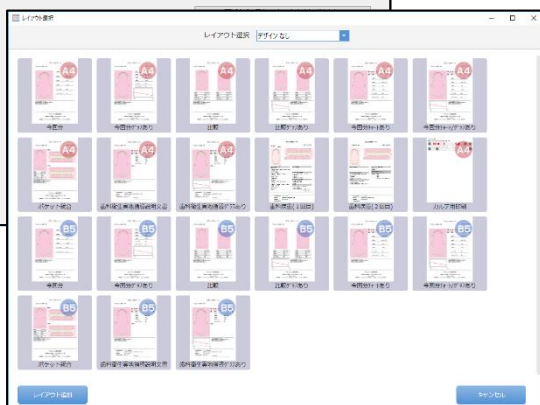




4. **写真管理設定**をクリックして下さい。

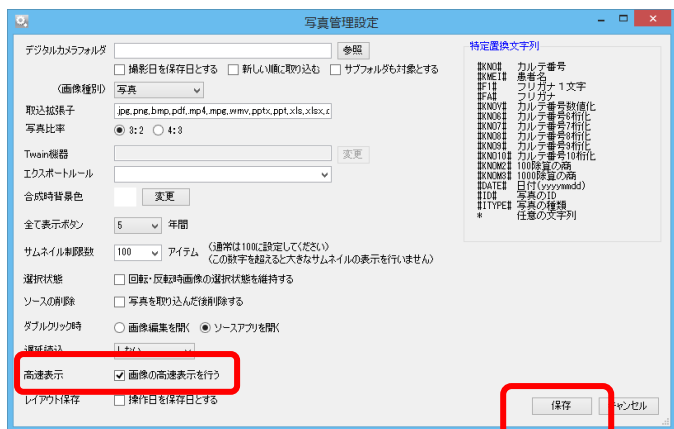


5. **画像の高速表示を行う**にチェックを入れ、**保存**をクリックして下さい。

5の設定は達人プラスがインストールされている全てのコンピュータに行って下さい。

以前より達人プラスをお使いの医院様は下記の操作を、達人プラスの親機で行って下さい。  
 達人プラスのデータ量により時間がかかる場合がございます。

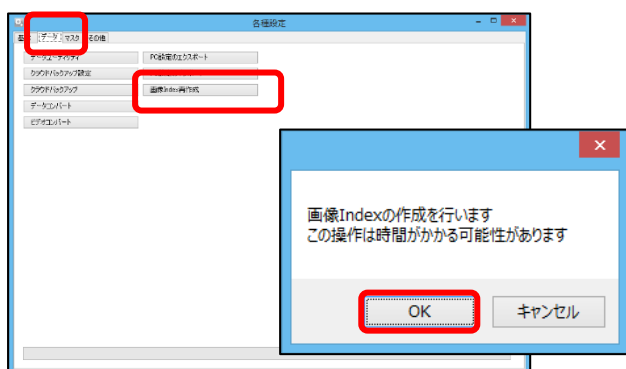


データタブを開き**画像 Index 再作成**をクリックして下さい。メッセージを確認し**OK**をクリックして下さい。

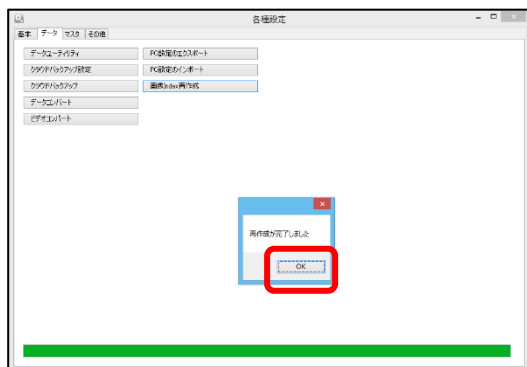

再作成が完了しましたのメッセージは**OK**をクリックして下さい。

## 達人プラス touch の端末設定

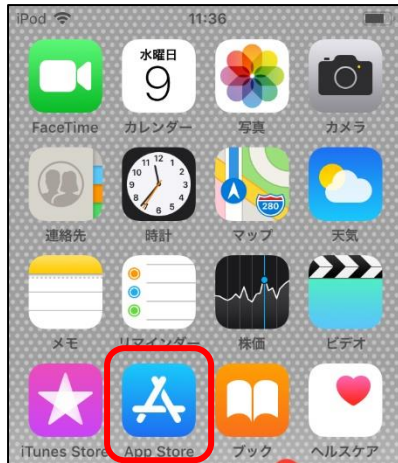

iOS 用



Android 用



1. App Store または play ストアより  
達人プラス touch をインストールして下さい。  
※達人プラス touch で検索を行うか下記 QR コードよりダウンロード先へ移動して下さい。


2. インストール後、達人プラス親機のネットワークへ接続し、達人プラス touch を起動して下さい。

3. **設定** を選択して下さい。

※同一ネットワーク内に達人プラスの親機が存在する必要があります。



4. 親機の IP アドレスを入力して下さい。  
※親機の達人プラス各種設定より、ステータス表示を開いて頂くと親機の IP アドレスが記載されております。

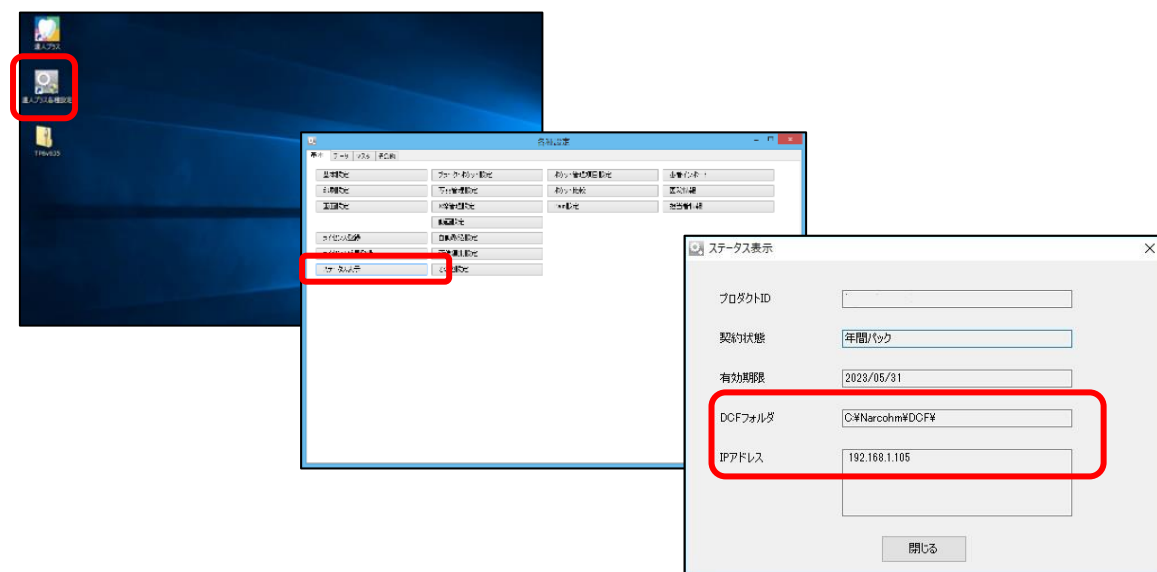

5. **テスト**を選択し、画面右上に成功の表示が出ましたら保存を選択して下さい。



操作方法につきましては  
操作マニュアルをご参照ください。